


Actualización del firmware optaro® XL

Instrucciones

1. Descargue el archivo de actualización desde la página web de Eschenbach, en la sección «**Materiales**», utilizando su iPad:

eschenbach-vision.com/es-ES/productos/resumen-de-productos/producto/optaror-xl-11-ipad-holder165341

2. Una vez descargado, encontrará el archivo BRN en la carpeta Descargas de su iPad.

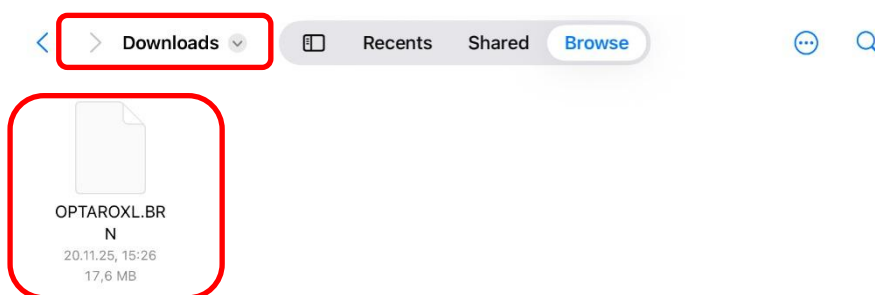


3. Encienda optaro® XL. Cuando el **LED azul** esté encendido de forma continua, mantenga pulsado el botón de actualización situado en la parte posterior del dispositivo (véase la marca roja) durante aproximadamente 5 segundos **hasta que el indicador LED de conexión**, situado en el puerto USB-C y junto al botón de actualización, **se ilumine en naranja**.



Mientras el **indicador LED de conexión esté naranja** (o parpadeando), optaro® XL se encuentra en modo de actualización y no se puede utilizar como de costumbre. Si se apaga optaro® XL durante la actualización del firmware o se pulsa el botón de reinicio, la actualización se interrumpirá y seguirá utilizándose el firmware antiguo.


4. Conecte optaro® XL a su iPad mediante el cable USB-C corto.



5. Abra la **carpeta Archivos** en su iPad  y, a continuación, abra la **carpeta Descargas**. El archivo BRN se encuentra almacenado allí.
6. La ubicación de almacenamiento «**NO NAME**» se muestra en la barra lateral del iPad. Mueva o copie el archivo BRN a la carpeta «**NO NAME**».

Hay diferentes formas de hacerlo:

- a. Arrastre y suelte el archivo desde la carpeta Descargas a la carpeta «**NO NAME**».
- b. Mantenga pulsado el archivo hasta que aparezca el menú contextual, seleccione «**Mover**» en el menú superior y pulse la carpeta «**NO NAME**». De este modo, el archivo se moverá a la carpeta designada.

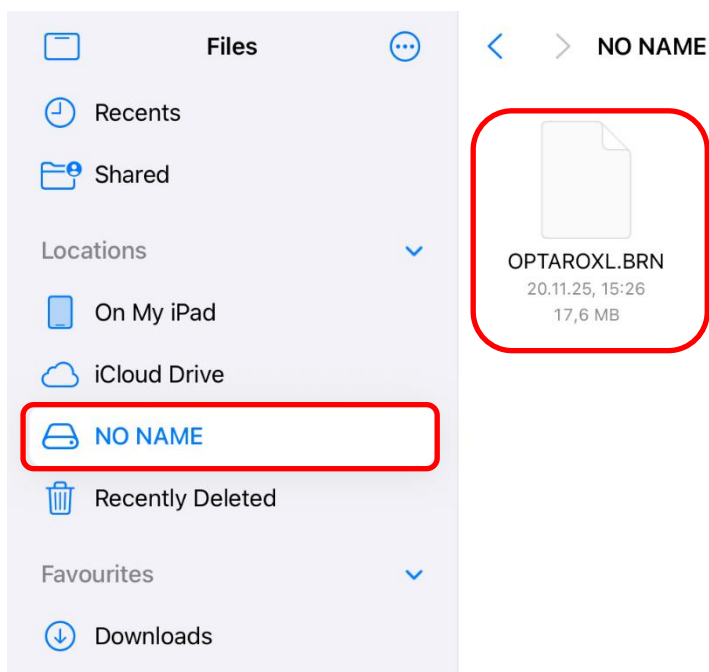

Importante:

Utilice únicamente el archivo de actualización denominado **OPTAROXL.BRN**. Si el archivo se ha renombrado, duplicado o descargado varias veces accidentalmente, lo que ha dado lugar a un nombre de archivo modificado, el dispositivo no reconocerá la actualización.

7. Ahora desconecte el cable USB-C corto del iPad.

El LED parpadeará en naranja durante un breve periodo de tiempo, lo que puede tardar hasta 3 minutos. Sin embargo, también es posible que el LED se apague tras unos segundos y vuelva a parpadear. En ese caso, espere un poco más para asegurarse de que la actualización se completa correctamente.

El LED se apagará por completo al cabo de un rato. El nuevo firmware se habrá instalado correctamente en optaro® XL.

8. Abra la configuración de la aplicación optaro® XL para comprobar si la actualización se ha instalado correctamente. **La versión actual del firmware se muestra en la sección «Acerca de».**

