

Bedienungsanleitung
User Manual
Instructions d'utilisation
Manuale d'uso
Manual de instrucciones
Gebruiksaanwijzing
Betjeningsvejledning
Bruksanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Instrukcja obsługi
Návod k obsluze
取扱説明書

DE

EN

FR

IT

ES

NL

DA

SV

NO

FI



PL

CS

JA



scribolux

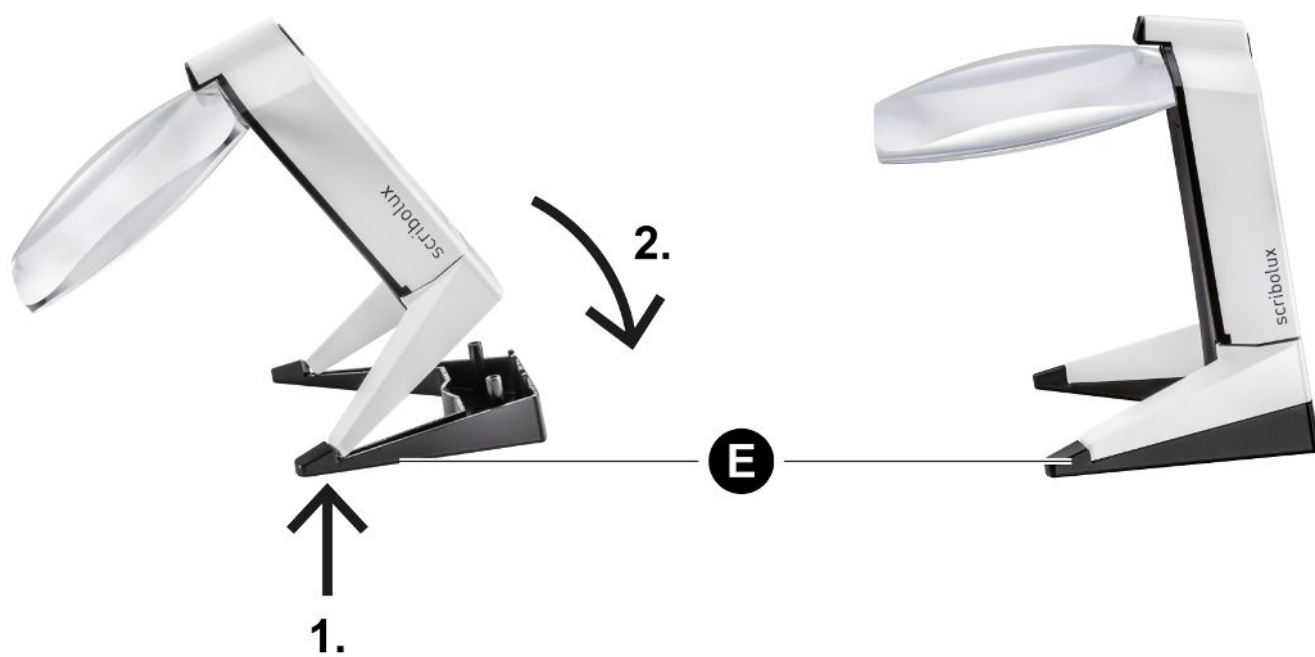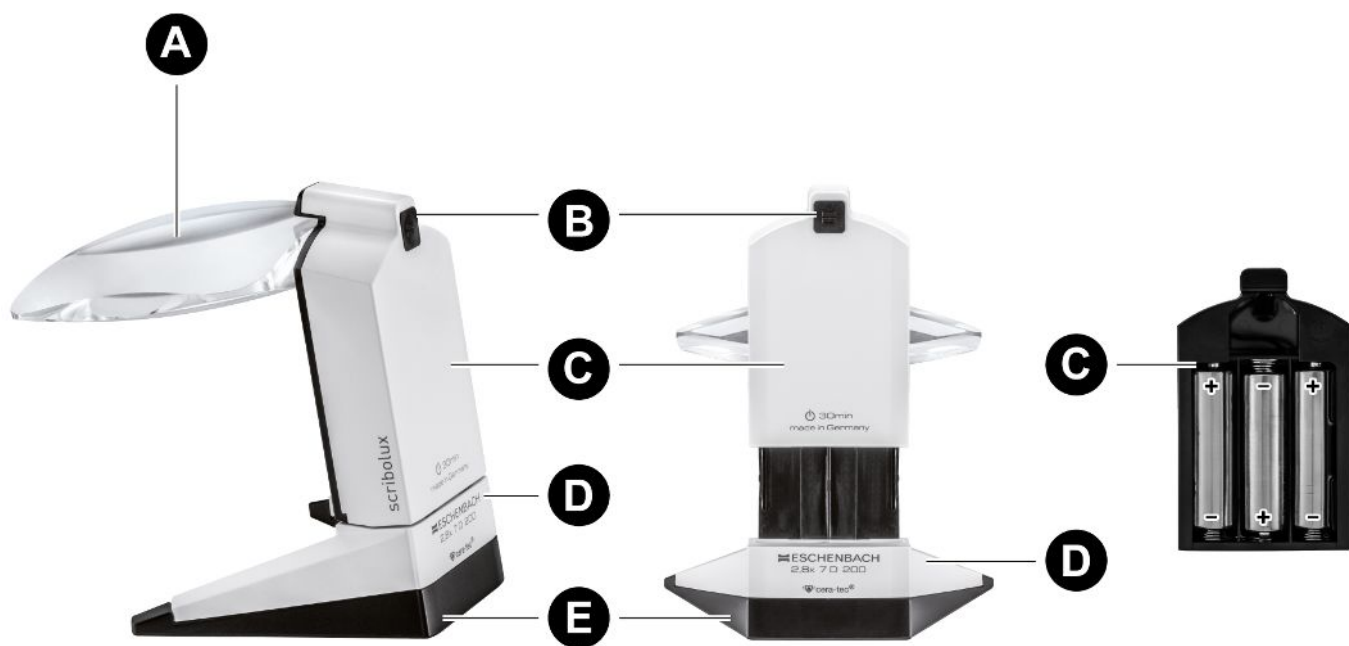

Deutsch

Über diese Anleitung

Diese Anleitung gilt für folgendes Produkt:

Leuchtlupe scribolux

Nr.
No.

Vergrößerung 2,8 ×

156514

Lesen Sie diese Anleitung aufmerksam durch, bevor Sie das hierin beschriebene Produkt verwenden. Bewahren Sie die Anleitung sorgfältig auf. Falls Sie das Produkt weitergeben, geben Sie auch diese Anleitung mit.

Die folgenden Zeichen und Symbole werden in dieser Anleitung und/oder auf dem Produkt verwendet:

Symbol	Bedeutung
	Generelle Warnung vor einer Gefahrenstelle
	Das Produkt nach den lokalen Richtlinien entsorgen
	Hersteller: siehe Rückseite

Sicherheitshinweise

 Das Produkt ist nach dem neuesten Stand der Technik konstruiert und entspricht den geltenden europäischen Richtlinien. Dennoch gibt es Restgefahren. Um Gefahren zu vermeiden, müssen Sie die Sicherheitshinweise beachten. Machen Sie auch andere Personen auf diese Gefahren aufmerksam.

Beim Umgang mit dem Produkt können Kinder sich verletzen. Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit Verpackungsmaterial und dem Produkt spielen.

Das Produkt ist ein Medizinprodukt der Klasse I (nicht steril, ohne Messfunktion) und entspricht der Verordnung (EU) 2017/745. Bei Einsatz des Produktes außerhalb der EU-Mitgliedsstaaten sind die jeweils landesspezifischen Richtlinien zu beachten.

Gefahr beim Umgang mit dem Produkt

- Lassen Sie optische Linsen nie ohne Abdeckung in der Sonne liegen. Durch die Brennglaswirkung der Linsen besteht Brandgefahr.
- Blicken Sie niemals mit optischen Produkten in die Sonne.
Blicken Sie nicht direkt in die Lichtquellen des Produkts (Risikogruppe 1 nach EN 62471).

Gefahr von Sachschaden

- Schützen Sie das Produkt vor Stoß oder Schlag, Feuchtigkeit und übermäßiger Wärme.
- Legen Sie das Produkt nie in die Nähe von Hitzequellen oder in direktes Sonnenlicht.
- Reinigen Sie das Produkt nicht unter fließendem Wasser oder im Ultraschallbad.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine Seifenlösungen mit Weichmachern, keine alkoholischen Lösungsmittel und keine scheuernden Reinigungsmittel.

Gefahr beim Umgang mit Batterien

- Überprüfen Sie regelmäßig die Batterien. Auslaufende Batterien können Beschädigungen am Produkt verursachen und bei Hautkontakt zu Reizungen führen.
- Entnehmen Sie die Batterien aus dem Batteriefach, sobald sie verbraucht sind oder Sie das Produkt längere Zeit nicht benutzen.
- Sorgen Sie für sachgerechte Entsorgung der Batterien. Batterien dürfen nicht in den Hausmüll geraten.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Produkt ist zum Vergrößern eines Lese- und Arbeitsbereichs bestimmt. Es ist ausschließlich für die Verwendung im Innenbereich in trockenen Räumen geeignet.

Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Anleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sach- oder Personenschäden führen. Nehmen Sie keine Veränderungen an der Konstruktion des Produkts vor. Für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind, wird keine Haftung übernommen.

Produktbeschreibung

Leuchtlupe

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| A Linse | B Taste [Ein/Aus] |
| C Batteriefach | D Standfuß |
| E Adapter | |

Betrieb

Batterien einlegen / wechseln



- Verwenden Sie stets 3 gleichartige, neue Batterien.
- Beachten Sie die Lage des jeweiligen Pluspols.

1. Schalten Sie die Beleuchtung der Leuchtlupe mit der Taste [Ein/Aus] **B** aus.
2. Ziehen Sie das Batteriefach **C** nach oben von der Leuchtlupe ab.
3. Entnehmen Sie die verbrauchten Batterien aus dem Batteriefach.
4. Setzen Sie die neuen Batterien in das Batteriefach ein.
⇒ Der Minuspol der Batterie zeigt in Richtung der Feder des Batteriefachs.
5. Setzen Sie das Batteriefach an der Oberkante der Befestigungsplatte an und schieben Sie das Batteriefach bis zum Anschlag nach unten.

Leuchtlupe ein- und ausschalten

1. Drücken Sie die Taste [Ein/Aus] **B**, um die Beleuchtung einzuschalten.
2. Drücken Sie die Taste [Ein/Aus] erneut, um die Beleuchtung auszuschalten.

Hinweis: Nach 30 Minuten schaltet sich die Beleuchtung automatisch aus.

Leuchtlupe verwenden

Wenn Sie zum Lesen normalerweise eine Brille benötigen, brauchen Sie diese nicht abzusetzen. Die Leuchtlupe ist so konzipiert, dass Sie auch zusammen mit Ihrer Lesebrille benutzt werden kann.

1. Stellen Sie die Leuchtlupe so auf das Leseut, dass die Linse zu Ihnen weist.
2. Schalten Sie die Beleuchtung ein.
3. Variieren Sie den Abstand vom Auge zur Leuchtlupe, bis Sie die das Leseut scharf sehen. Der richtige Abstand ist individuell verschieden. Er ist von der verwendeten Lesebrille und von der Anpassungsfähigkeit Ihrer Augen abhängig. Der Richtwert für den Abstand beträgt 200 mm.
4. Schalten Sie die Beleuchtung nach der Verwendung aus.

Lichtintensität einstellen

- ✓ Die Beleuchtung ist eingeschaltet.
- 1. Halten Sie die Taste **[Ein/Aus]** **B** gedrückt.
- ⇒ Nach ca. 3 Sek. wird die Lichtintensität zwischen 100 %, 75 % und 50 % durchgeschaltet.
- 2. Lassen Sie die Taste **[Ein/Aus]** beim Erreichen der gewünschten Lichtintensität los.

Farbtemperatur einstellen

Sie können folgende Farbtemperaturen einstellen:

- 6000 K: kaltweißes Licht
- 4700 K: neutralweißes Licht
- 2800 K: warmweißes Licht
- ✓ Die Beleuchtung ist ausgeschaltet.
- 1. Halten Sie die Taste **[Ein/Aus]** **B** gedrückt.
- ⇒ Nach ca. 3 Sek. wird die Farbtemperatur zwischen 6000 K, 4700 K und 2800 K durchgeschaltet.
- 2. Lassen Sie die Taste **[Ein/Aus]** beim Erreichen der gewünschten Farbtemperatur los.

Adapter verwenden

Für einen bequemen Schrägeinblick können Sie die Leuchtlupe mit dem mitgelieferten Adapter verwenden.

Adapter einsetzen

1. Setzen Sie die Leuchtlupe mit den Spitzen des Standfußes **D** auf den Adapter.
2. Drücken Sie die Leuchtlupe hinten vorsichtig nach unten.
- ⇒ Die Leuchtlupe rastet auf dem Adapter ein.

Adapter entfernen

1. Fassen Sie den Adapter mit der einen Hand und den Standfuß mit der anderen Hand.
2. Ziehen Sie den Adapter hinten nach unten vom Standfuß ab.

Technische Daten

Vergrößerung	
Art.-Nr. 156514	2,8 ×
Lichtquelle	
Leuchtmittel	LED (Risikogruppe 1 nach EN 62471)
Spannungsversorgung	
Batterie	3 × Mignon (AA/LR6) / 1,5 V
Umgebungsbedingungen	
Betriebstemperaturen	0 °C ... 40 °C

Reinigung und Pflege

1. Stellen Sie sicher, dass die Leuchtlupe ausgeschaltet ist.
2. Reinigen Sie die Linse mit einem weichen, fusselfreien Tuch, z. B. einem Mikrofasertuch.
3. Bei stärkeren Verschmutzungen, z. B. Fingerabdrücken, feuchten Sie das Tuch leicht an. Verwenden Sie keine Seifenlösungen, die Weichmacher enthalten, keine alkoholischen Lösungsmittel und keine scheuernden Reinigungsmittel.
4. Bewahren Sie die Leuchtlupe bei Nichtverwendung abgedeckt auf oder ziehen Sie den beiliegenden Mikrofaserbeutel über die Linse der Lupe.

Entsorgung

Entsorgung von Elektrogeräten



Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte in ihrer jeweils aktuell gültigen Fassung. Das Produkt darf nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden.

Entsorgen Sie das Produkt oder Teile davon über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung. Führen Sie alle Verpackungsmaterialien einer umweltgerechten Entsorgung zu.

Entsorgung von Batterien und Akkus



Batterien und Akkus dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden.

Zur Entsorgung entnehmen Sie die Batterien oder Akkus aus dem Gerät und geben Sie sie bei einer offiziellen Sammelstelle ab.

Konformitätserklärung

Das Produkt erfüllt alle Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien und nationalen Vorschriften. Dies bestätigen wir durch die CE-Kennzeichnung. Sie können die Konformitätserklärung für dieses Produkt auf folgender Website abrufen: <http://www.eschenbach-vision.com/de-DE/konformitaetserklaerungen>.

Gewährleistung

Eschenbach Optik GmbH gewährt im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen die Funktion des in dieser Anleitung beschriebenen Produktes in Hinsicht auf auftretende Mängel, die auf Fabrikationsfehler oder Materialfehler zurückzuführen sind. Bei Schäden durch unsachgemäße Behandlung, auch bei Beschädigung durch Fall oder Stoß, besteht kein Gewährleistungsanspruch. Die Gewährleistung kann nur unter Vorlage des Kaufbelegs in Anspruch genommen werden.

English

About this manual

This manual applies to the following product:

Illuminated magnifier scribolux

Nr.
No.

Magnification 2.8 ×

156514

Read through this manual carefully before using the product described in it. Keep the manual in a safe place. If you pass on the product, give the recipient this manual too.

The following signs and symbols are used in this manual and/or on the product:

Symbol	Meaning
	General warning of a hazard
	Dispose of the product according to the local guidelines
	Manufacturer: see back page

Safety instructions

 The product is designed and built to state-of-the-art standards and complies with the relevant European directives. Nonetheless, residual hazards exist. To avoid hazards, you must follow the safety instructions. Make sure that other people are also aware of these hazards.

Children can injure themselves when handling the product. Never allow unsupervised children to play with packaging material and the product.

The product is a Class I medical device (non-sterile, without measuring function) and complies with Regulation (EU) 2017/745. For use of the production outside the EU member states, the respective country-specific directives must be observed.

Risk when handling the product

- Never leave optical lenses lying in the sun without a cover. The burning glass effect of the lenses poses a fire hazard.
- Never look at the sun through optical products.

Never look directly into the product's light sources (risk group 1 to EN 62471).

Risk of property damage

- Protect the product from impact or shock, moisture and excessive heat.
- Never place the product near heat sources or in direct sunlight.
- Do not clean the product under flowing water or in an ultrasonic bath.
- Do not use soap solutions containing plasticisers, alcohol-based solvents or abrasive cleaning products to clean the product.

Risk when handling batteries

- Check the batteries regularly. Leaking batteries can cause damage to the product and it could lead to irritation if the leakage makes contact with the skin.
- Remove the batteries from the battery compartment as soon as they are spent or if the product is to be unused for a long period of time.
- Make sure that the batteries are disposed of properly. Do not dispose of batteries in the household waste.

Intended use

The product is intended for magnifying a reading and working area. It is only suitable for indoor use in dry rooms.

Only use the product as described in this manual. Any other use is considered improper and can lead to property damage or personal injury. Do not make any changes to the construction of the product. No liability is assumed for damage caused by improper or incorrect use.

Product description

Illuminated magnifier

A Lens	B [On/Off] button
C Battery compartment	D Stand
E Adapter	

Operation

Inserting / changing the batteries



- Always use 3 new batteries of the same type.
- Note the position of the respective positive terminal.

1. Use the [On/Off] button **B** to switch off the lighting of the illuminated magnifier.
 2. Pull the battery compartment **C** off the illuminated magnifier from above.
 3. Remove the spent batteries from the battery compartment.
 4. Insert the new batteries into the battery compartment.
- ⇒ The negative terminal of the battery is pointed in the direction of the battery compartment's spring.
5. Position the battery compartment on the top edge of the mounting plate and push the battery compartment downwards until it stops.

Switching the illuminated magnifier on and off

1. Press the [On/Off] button **B** to switch on the light.
2. Press the [On/Off] button again to switch off the light.

Note: The light switches off automatically after 30 minutes.

Using the illuminated magnifier

If you normally wear glasses for reading, you do not need to remove them. The illuminated magnifier is designed to also be used together with your reading glasses.

1. Position the illuminated magnifier on the reading material so that the lens is facing you.
2. Switch on the light.
3. Vary the distance between your eyes and the illuminated magnifier until you see the reading material clearly. The correct distance differs for each individual. It depends on the reading glasses used and the adaptability of your eyes. The guide value for the distance is 200 mm.
4. Switch off the light after use.

Adjusting the light intensity

- ✓ The light is switched on.
1. Keep the *[On/Off]* button **B** pressed.
- ⇒ After approx. 3 sec., the light intensity is switched between 100 %, 75 % and 50 %.
2. Let go of the *[On/Off]* button when the required light intensity is reached.

Setting the colour temperature

You can set the following colour temperatures:

- 6000 K: cold white light
 - 4700 K: neutral white light
 - 2800 K: warm white light
- ✓ The light is switched off.
1. Keep the *[On/Off]* button **B** pressed.

⇒ After approx. 3 sec., the colour temperature is switched between 6000 K, 4700 K and 2800 K.

2. Let go of the *[On/Off]* button when the required colour temperature is reached.

Using the adapter

You can use the illuminated magnifier with the adapter supplied for a more comfortable inclined view.

Inserting the adapter

1. Position the illuminated magnifier with the tip of the stand **D** on the adapter.
 2. Carefully press the back of the illuminated magnifier downwards.
- ⇒ The illuminated magnifier latches onto the adapter.

Removing the adapter

1. Grip the adapter with one hand and the stand with your other hand.
2. Pull the back of the adapter downwards and off the stand.

Technical data

Magnification	
Article no. 156514	2.8 x
Light source	
Lamp	LED (risk group 1 to EN 62471)
Power supply	
Battery	3 × Mignon (AA/LR6) / 1.5 V
Ambient conditions	
Operating temperatures	0 °C ... 40 °C

Cleaning and care

1. Make sure that the illuminated magnifier is switched off.
2. Clean the lens with a soft, lint-free cloth, for example, a microfibre cloth.
3. For heavier soiling, e. g. finger-marks, moisten the cloth slightly. Do not use soap solutions containing plasticisers, alcohol-based solvents or abrasive cleaning products.
4. When not in use, keep the illuminated magnifier covered or pull the enclosed microfibre bag over the lens of the magnifier.

Disposal

Disposal of electrical equipment



This product is subject to the currently valid version of the European Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment. Do not dispose of the product in the normal household waste bin.

Dispose of the product or parts of it through a certified disposal facility or your municipal disposal facility. Note and comply with the currently applicable regulations. If in doubt, contact your disposal management facility. Dispose if all packaging materials in an environmentally friendly manner.

Disposal of batteries and rechargeable batteries



Do not dispose of batteries and rechargeable batteries in the household waste bin.

To dispose of the device, remove the batteries or rechargeable batteries from the device and hand them in to an official collection point.

Declaration of Conformity

The product meets all requirements of the relevant EU directives and the national regulations. We confirm this with the CE marking. You can retrieve the declaration of conformity for this product on the following website: <http://www.eschenbach-vision.com/de-DE/konformitaetserklaerungen>.

Supplier's Declaration of Conformity

47 CFR § 2.1077 Compliance Information

Unique Identifier

Trade Name: scribolux

Model No.: 156514

Responsible Party – U.S. Contact Information

Eschenbach Optik of America, Inc.
22 Shelter Rock Lane
Danbury, CT 06810
United States

Tel.: (800) 487-5389

Fax: (888) 799-7200

FCC Compliance Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any in-

interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

MODIFICATION: Any changes or modifications not expressly approved by the grantee of this device could void the user's authority to operate the device.

Guarantee

Within the parameters of the applicable statutory provisions, Eschenbach Optik GmbH provides a guarantee for the function of the product described in this manual with regard to any faults arising due to manufacturing defects or material defects. In the event of damage due to improper handling, including damage from a fall or impact, no guarantee claims can be made. The guarantee can only be claimed by presenting proof of purchase.

À propos de ces instructions

Ces instructions s'appliquent au produit suivant :

Lampe-loupe scribolux

Nr.
No.

Grossissement 2,8 x

156514

Lisez attentivement ces instructions avant d'utiliser le produit décrit dans ce document. Conservez soigneusement ces instructions. Si vous remettez le produit à quelqu'un d'autre, donnez-lui également ces instructions.

Les signes et symboles suivants sont utilisés dans ces instructions et/ou sur le produit :

Symbole	Signification
	Avertissement général concernant une zone dangereuse
	Éliminer le produit conformément aux directives locales
	Fabricant : voir au dos

Consignes de sécurité

 Ce produit a été développé et fabriqué selon l'état actuel de la technique et les directives de sécurité européennes reconnues. Cependant, il existe des dangers résiduels. Pour éviter tout danger, veuillez respecter les consignes de sécurité. Attirez également l'attention d'autres personnes sur ces dangers.

Les enfants peuvent se blesser en manipulant le produit. Ne laissez jamais les enfants jouer sans surveillance avec le matériel d'emballage ou le produit.

Le présent produit est un dispositif médical de classe I (non stérile, sans fonction de mesure) conforme au règlement (UE) 2017/745. En cas de mise en œuvre du produit hors des États membres de l'UE, les directives en vigueur dans le pays respectif doivent être respectées.

Danger lors de la manipulation du produit

- Ne laissez jamais les lentilles optiques au soleil sans cache. L'effet de loupe des lentilles peut provoquer un risque d'incendie.
- Ne regardez jamais le soleil avec des instruments optiques.

Ne regardez pas directement les sources lumineuses du produit (groupe de risque 1 selon EN 62471).

Risque de dommages matériels

- Protégez le produit contre les chocs ou les coups, l'humidité et la chaleur excessive.
- Ne placez jamais le produit à proximité d'une source de chaleur ou à la lumière directe du soleil.
- Ne nettoyez pas le produit sous l'eau courante ni dans un bain à ultrasons.
- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de solutions savonneuses contenant des adoucissants, de solvants à base d'alcool ni de détergents abrasifs.

Danger lors de la manipulation des piles

- Contrôlez régulièrement les piles. Les fuites de piles peuvent causer des dommages sur l'appareil et entraîner des irritations en cas de contact cutané.
- Retirez les piles du compartiment à piles dès que celles-ci sont usagées ou que vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période prolongée.
- Veillez à une élimination correcte des piles. Les piles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères.

Utilisation conforme

Le produit est destiné à agrandir la zone de lecture et de travail. Il est exclusivement destiné à une utilisation en intérieur dans des pièces sèches.

N'utilisez le produit que comme décrit dans ces instructions. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme et peut entraîner des dommages matériels ou corporels. N'apportez aucune modification à la conception du produit. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages résultant d'une utilisation non conforme ou incorrecte.

Description du produit

Lampe-loupe

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| A Lentille | 1 Touche
[Marche/Arrêt] |
| C Compartiment à piles | D Pied de support |
| E Adaptateur | |

Fonctionnement

Mettre en place / changer les piles



- Il convient d'installer systématiquement 3 piles neuves de même type.
- Respectez à chaque fois la position du pôle positif.

1. Éteignez l'éclairage de la lampe-loupe à l'aide de la touche [Marche/Arrêt] **B**.
2. Retirez le compartiment à piles **C** de la lampe-loupe vers le haut.
3. Retirez les piles usagées du compartiment à piles.
4. Insérez les piles neuves dans le compartiment à piles.
⇒ Le pôle négatif de la pile est dirigé vers les ressorts du compartiment à piles.
5. Placez le compartiment à piles sur le bord supérieur de la plaque de fixation et faites glisser le compartiment à piles vers le bas jusqu'à la butée.

Allumer et éteindre la lampe-loupe

1. Appuyez sur la touche [Marche/Arrêt] **B** pour allumer l'éclairage.
2. Appuyez à nouveau sur la touche [Marche/Arrêt] pour éteindre l'éclairage.

Remarque : l'éclairage s'éteint automatiquement après 30 minutes.

Utiliser la lampe-loupe

Si vous utilisez normalement des lunettes pour la lecture, il est inutile de les enlever. La lampe-loupe est conçue de manière à pouvoir être utilisée avec vos lunettes de lecture.

1. Placez la lampe-loupe sur l'objet à lire de manière à ce que la lentille soit dirigée dans votre direction.
2. Allumez l'éclairage.
3. Modifiez la distance entre l'œil et la lampe-loupe jusqu'à ce que l'objet à lire vous semble net. La distance varie d'une personne à l'autre. Elle dépend des lunettes de lecture utilisées et du pouvoir d'accommodation de vos yeux. La valeur indicative de la distance est de 200 mm.
4. Éteignez l'éclairage après utilisation.

Régler l'intensité de la lumière

✓ L'éclairage est allumé.

1. Maintenez la touche *[Marche/Arrêt]* **B** enfoncée.
⇒ Après environ 3 secondes, l'intensité de la lumière variera entre 100 %, 75 % et 50 %.
2. Relâchez la touche *[Marche/Arrêt]* lorsque vous avez atteint la luminosité qui vous convient.

Réglage de la température de couleur

Vous pouvez régler les températures de couleur suivantes :

- 6000 K : lumière blanche froide
- 4700 K : lumière blanche neutre
- 2800 K : lumière blanche chaude
- ✓ L'éclairage est éteint.

1. Maintenez la touche *[Marche/Arrêt]* **B** enfoncée.
⇒ Après environ 3 secondes, la température de la couleur variera entre 6000 K, 4700 K et 2800 K.
2. Relâchez la touche *[Marche/Arrêt]* lorsque vous avez atteint la température de couleur qui vous convient.

Utiliser l'adaptateur

Pour une vision inclinée plus confortable, vous pouvez utiliser la lampe-loupe avec l'adaptateur livré.

Installer l'adaptateur

1. Placez la lampe-loupe avec les pointes du pied de support **D** sur l'adaptateur.
2. Poussez ensuite avec précaution l'arrière de la lampe-loupe vers le bas.
⇒ La lampe-loupe s'enclenche sur l'adaptateur.

Retirer l'adaptateur

1. Saisissez l'adaptateur à une main et le pied de support à l'aide de l'autre main.
2. Retirez l'adaptateur hors du pied de support en le tirant vers le bas.

Caractéristiques techniques

Grossissement	
N° d'article 156514	2,8 ×
Source lumineuse	
Sources de lumière	LED (groupe de risque 1 selon EN 62471)
Alimentation électrique	
Piles	3 × Mignon (AA/LR6) / 1,5 V
Conditions ambiantes	
Températures de service	0 °C ... 40 °C

Nettoyage et entretien

1. Assurez-vous que la lampe-loupe est éteinte.
2. Nettoyez la lentille avec un chiffon doux non pelucheux, un chiffon microfibre par exemple.
3. En cas de salissures prononcées (par ex. des traces de doigts), humidifiez légèrement le chiffon. N'utilisez pas de solutions savonneuses contenant des adoucissants, de solvants à base d'alcool ni de détergents abrasifs.
4. Lorsque vous n'utilisez pas la lampe-loupe, protégez-la en la couvrant ou enfiler la pochette en microfibre fournie sur la lentille de la loupe.

Élimination

Éliminer les appareils électriques



Ce produit est soumis à la Directive européenne relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) dans sa

version actuelle. Le produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers normaux.

Éliminez le produit ou ses pièces par l'intermédiaire d'une entreprise de traitement des déchets agréée ou de votre service municipal de traitement des déchets. Respectez la réglementation en vigueur. En cas de doute, contactez votre service d'élimination des déchets. Éliminez tous les matériaux d'emballage de manière écologique.

Éliminer les batteries et accumulateurs



Les piles et les accumulateurs ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères.

Pour les éliminer, retirez les piles ou les accumulateurs de l'appareil et déposez-les dans un point de collecte officiel.

Déclaration de conformité

Le produit est conforme à toutes les exigences des directives européennes et des réglementations nationales en vigueur. Nous le confirmons en apposant le marquage CE. Vous pouvez consulter la déclaration de conformité de ce produit sur le site Web suivant : <http://www.eschenbach-vision.com/de-DE/konformitaetserklaerungen>.

Garantie

Eschenbach Optik GmbH garantit, dans le cadre des dispositions légales, le fonctionnement du produit décrit dans ces instructions en ce qui concerne les défauts qui apparaissent et qui sont dus à des défauts de fabrication ou de matériel. La garantie s'éteint en cas de dommages dus à une mauvaise manipulation, y compris en cas de chute ou de choc. La garantie ne peut être invoquée que sur présentation de la preuve d'achat.

Su questo manuale

Le presenti istruzioni valgono per il seguente prodotto:

Lampada con lente d'ingrandimento scribolux

Nr.
No.

Ingrandimento 2,8 ×

156514

Leggere attentamente il presente manuale d'uso prima di utilizzare il prodotto in esso descritto. Conservare il manuale d'uso con cura. Se si cede il prodotto a terzi, consegnare anche il presente manuale.

In questo manuale e/o sul prodotto sono riportati i seguenti segnali e simboli:

Simbolo	Significato
	Pericolo generico punto pericoloso
	Smaltire il prodotto secondo le direttive locali
	Produttore: vedere sul retro

Avvertenze di sicurezza

 Il prodotto è stato progettato secondo lo stato attuale della tecnica ed è conforme alle direttive europee in vigore. Tuttavia esistono rischi residui. Per evitare pericoli, si devono osservare le avvertenze sulla sicurezza. Segnalare questi pericoli anche ad altre persone.

I bambini possono ferirsi durante l'uso del prodotto. Non far giocare mai i bambini non sorvegliati con il materiale d'imballaggio e il prodotto.

Il prodotto è un prodotto medico appartenente alla classe I (non sterile, senza funzione di misurazione) e soddisfa la direttiva (UE) 2017/745. L'impiego del prodotto al di fuori degli Stati membri dell'UE implica il rispetto delle direttive specifiche del paese.

Pericolo nel maneggiare il prodotto

- Non esporre mai le lenti ottiche alla luce diretta del sole senza un'adeguata copertura. Pericolo d'incendio a causa dell'effetto lente focale delle lenti.
- Non fissare mai il sole con prodotti ottici.

Non guardare direttamente nelle sorgenti luminose del prodotto (classe di rischio 1 ai sensi della norma EN 62471).

Pericolo di danni materiali

- Proteggere il prodotto da colpi o urti, umidità e calore eccessivo.
- Non posizionare mai il prodotto nelle vicinanze di fonti di calore né esporlo alla luce solare diretta.
- Non pulire il prodotto sotto l'acqua corrente o in un bagno a ultrasuoni.
- Per la pulizia, non utilizzare soluzioni saponate contenenti emollienti, né solventi alcolici o detergenti abrasivi.

Pericolo nel maneggiare le batterie

- Controllare regolarmente le batterie. Le batterie che presentano perdite possono arrecare danni al prodotto e provocare irritazioni in caso di contatto con la pelle.

- Rimuovere le batterie dal vano batterie non appena si scaricano o se si prevede di non utilizzare il prodotto per un periodo di tempo prolungato.
- Garantire uno smaltimento corretto delle batterie. Le batterie non si devono smaltire insieme ai rifiuti domestici.

Uso conforme

Il prodotto è concepito per ingrandire l'area di lettura e di lavoro. È adatto esclusivamente per l'uso in ambienti interni asciutti.

Utilizzare il prodotto soltanto come descritto nel presente manuale d'uso.

Qualsiasi impiego diverso da quello previsto è da considerarsi inappropriato e può provocare danni a persone o cose. Non apportare modifiche alla struttura del prodotto. Per danni provocati dall'uso non conforme o errato non ci assumiamo alcuna responsabilità.

Descrizione del prodotto

Lampada con lente d'ingrandimento

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| A Lente | B Tasto [ON/OFF] |
| C Vano batterie | D Piede di appoggio |
| E Adattatore | |

Funzionamento

Inserimento / sostituzione delle batterie



- Utilizzare sempre 3 batterie nuove dello stesso tipo.
- Fare attenzione alla posizione di ciascun polo positivo.

1. Spegner la luce della lampada con lente d'ingrandimento tramite il tasto [ON/OFF] **B**.
2. Tirare il vano batterie **C** dalla lampada verso l'alto.
3. Rimuovere le batterie scariche dal vano batterie.
4. Inserire le batterie nuove nel vano batterie.
⇒ Il polo negativo della batteria è rivolto verso le molle del vano batterie.
5. Posizionare il vano batterie sul bordo superiore della piastra di fissaggio e spingere il vano batterie verso il basso fino alla battuta.

Accendere e spegnere la lampada con lente d'ingrandimento

1. Accendere la luce premendo il tasto [ON/OFF] **B**.
2. Premere di nuovo il tasto [ON/OFF] per spegnere la luce.

Nota: la luce si spegne automaticamente dopo 30 minuti.

Utilizzare la lampada con lente d'ingrandimento

Se normalmente si indossano occhiali per leggere, non è necessario toglierli. La lampada con lente d'ingrandimento è progettata in modo da poter essere utilizzata anche con i propri occhiali da lettura.

1. Posizionare la lente d'ingrandimento sul testo da leggere in modo che sia leggermente inclinata verso il lettore.
2. Accendere la luce.
3. Variare la distanza della lente d'ingrandimento dagli occhi, fino a mettere a fuoco il testo. La distanza giusta varia da caso a caso e dipende dagli occhiali da lettura utilizzati e dalla capacità di adattamento degli occhi. Il valore indicativo per la distanza è 200 mm.
4. Dopo l'uso, spegnere la luce.

Regolare l'intensità luminosa

✓ La luce è accesa.

1. Tenere premuto il tasto **[ON/OFF]** **B**.
⇒ Dopo circa 3 secondi, l'intensità luminosa viene commutata tra 100 %, 75 % e 50 %.
2. Una volta raggiunta l'intensità luminosa desiderata, rilasciare il tasto **[ON/OFF]**.

Regolare la temperatura di colore

Si possono impostare le seguenti temperature di colore:

- 6000 K: luce di colore bianco freddo
- 4700 K: luce di colore bianco neutro
- 2800 K: luce di colore bianco caldo
- ✓ La luce è spenta.

1. Tenere premuto il tasto **[ON/OFF]** **B**.
⇒ Dopo circa 3 secondi, la temperatura di colore viene commutata tra 6000 K, 4700 K e 2800 K.
2. Una volta raggiunta la temperatura di colore desiderata, rilasciare il tasto **[ON/OFF]**.

Utilizzare l'adattatore

Per poter dirigere lo sguardo più comodamente in direzione obliqua, si può utilizzare la lampada con l'adattatore fornito in dotazione.

Inserire l'adattatore

1. Collocare la lampada sull'adattatore con le punte del piede di appoggio **D**.
2. Poi, sul retro, spingere la lampada con cautela verso il basso.
⇒ La lampada si aggancia all'adattatore.

Rimuovere l'adattatore

1. Afferrare l'adattatore con una mano e il piede di appoggio con l'altra mano.
2. Sul retro, tirare l'adattatore dal piede di appoggio verso il basso.

Dati tecnici

Ingrandimento	
Cod. art. 156514	2,8 ×
Sorgente luminosa	
Lampadina	LED (classe di rischio 1 sec. EN 62471)
Tensione di alimentazione	
Batteria	3 × Mignon (AA/LR6) / 1,5 V
Condizioni ambientali	
Temperature di esercizio	tra 0 °C e +40 °C

Pulizia e manutenzione

1. Accertarsi che la lampada sia spenta.
2. Pulire la lente con un panno morbido privo di pelucchi, ad es. un panno in microfibra.
3. In caso di sporco eccessivo, ad es. impronte digitali, inumidire leggermente il panno. Non utilizzare soluzioni saponate contenenti emollienti, né solventi alcolici o detergenti abrasivi.
4. Quando non utilizzata, conservare la lampada con lente d'ingrandimento coperta oppure coprire la lente della lampada con la custodia in microfibra fornita in dotazione.

Smaltimento

Smaltimento degli apparecchi elettrici



Il presente prodotto rientra nella direttiva europea sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche nella versione attualmente in vigore. Il prodotto non deve essere smaltito insieme ai normali rifiuti domestici.

Smaltire il prodotto o parti di esso tramite una ditta di smaltimento autorizzata o presso il centro di smaltimento comunale. Rispettare le norme in vigore. In caso di dubbio, contattare le relative strutture di smaltimento. Smaltire tutti i materiali di imballaggio nel rispetto dell'ambiente.

Smaltimento di batterie e accumulatori



Non smaltire le batterie e gli accumulatori insieme ai rifiuti domestici.

Prima dello smaltimento, rimuovere le batterie dal dispositivo e consegnarle a un centro di raccolta ufficiale.

Dichiarazione di conformità

Il prodotto soddisfa tutti i requisiti delle direttive UE in vigore e delle disposizioni nazionali e lo attestiamo con il contrassegno CE. La dichiarazione di conformità relativa a questo prodotto si può visionare sul nostro sito web al seguente link: <http://www.eschenbach-vision.com/de-DE/konformitaetserklaerungen>.

Garanzia

Eschenbach Optik GmbH, nell'ambito delle disposizioni di legge, garantisce il funzionamento del prodotto descritto nel presente manuale d'uso per quanto riguarda eventuali vizi dovuti a difetti di fabbricazione o di materiale. In caso di danni causati da un uso improprio o anche da cadute o urti, decade qualsiasi diritto di garanzia. La garanzia può essere rivendicata solo dietro presentazione dello scontrino di acquisto.

Acerca de este manual

El presente manual se aplica al siguiente producto:

Lupa luminosa scribolux

Nr.
No.

Aumento de 2,8 ×

156514

Lea detenidamente estas instrucciones antes de utilizar el producto aquí descrito. Conserve el manual en un lugar seguro. Si entrega el producto a otra persona, entregue también este manual.

Los siguientes signos y símbolos se utilizan en estas instrucciones y/o en el producto:

Símbolo	Significado
	Advertencia general de zona peligrosa
	Elimine el producto de acuerdo con la normativa local
	Fabricante: véase reverso

Instrucciones de seguridad

 El producto ha sido diseñado según el estado actual de la técnica y cumple las directivas europeas aplicables. No obstante, existen peligros residuales. A fin de evitar peligros, debe observar las instrucciones de seguridad. Informe a otras personas de estos peligros.

Los niños pueden lesionarse al manipular el producto. No permita nunca que los niños jueguen con el material de embalaje y el producto sin supervisión.

Este producto es un producto sanitario de clase I (no estéril y sin función de medición) y cumple con lo dispuesto por el Reglamento (UE) 2017/745. Si se utiliza el producto fuera de los Estados miembros de la UE, deben observarse las normas específicas del país que corresponda.

Peligro al manipular el producto

- No deje que las lentes ópticas queden nunca expuestas al sol sin tapa. Existe riesgo de incendio debido al efecto lupa de las lentes.
- No mire nunca al sol a través de un producto óptico.
¡No mire directamente a las fuentes de luz del producto (Grupo de riesgo 1 según la norma EN 62471).

Peligro por daños materiales

- Proteja el producto contra golpes o impactos, de la humedad y del calor excesivo.
- No coloque nunca el producto cerca de fuentes de calor ni bajo la luz directa del sol.
- ¡No limpie la lupa de pie situándola bajo agua corriente ni mediante baño de ultrasonidos!
- No utilice soluciones jabonosas con plastificantes, disolventes alcohólicos o productos de limpieza abrasivos para la limpieza.

Peligro al manipular las pilas

- Compruebe las pilas con regularidad. Las pilas gastadas pueden dañar el producto y causar irritaciones si entran en contacto con la piel.
- Retire las pilas del compartimento en cuanto se agoten o si no va a utilizar el producto durante un periodo prolongado.
- Asegúrese de que las pilas se eliminen correctamente. Las pilas no debe eliminarse junto con los residuos domésticos.

Uso previsto

El producto está diseñado para ampliar la zona de lectura y de trabajo. Solo es apto para su uso en interiores en espacios secos.

Utilice el producto únicamente como se describe en este manual. Cualquier otro uso se considera inadecuado y puede provocar daños materiales o personales. No realice ninguna modificación en la estructura del producto. No se acepta ninguna responsabilidad por los daños causados por un uso inadecuado o incorrecto.

Descripción del producto

Lupa luminosa

A Lente	B Botón de [Encendido/Apagado]
C Compartimento de las pilas	D Base
E Adaptador	

Funcionamiento

Insertar / cambiar las pilas



- Utilice siempre 3 pilas nuevas del mismo tipo.
- Observe la posición del polo positivo correspondiente.

1. Desconecte la iluminación de la lupa luminosa mediante el botón de [Encendido/Apagado] **B**.
2. Tire del compartimento de las pilas **C** hacia arriba y sepárelo de la lupa luminosa.
3. Retire las pilas usadas del compartimento de las pilas.
4. Retire las pilas usadas del compartimento de las pilas.
⇒ El polo negativo de la pila debe coincidir con el resorte del compartimento de la pila.
5. Coloque el compartimento de las pilas en el borde superior de la placa de fijación y deslice el compartimento de las pilas hacia abajo hasta que se detenga.

Encender y apagar la lupa luminosa

1. Pulse el botón de [Encendido/Apagado] **B** para encender la lámpara.
2. Pulse de nuevo el botón de [Encendido/Apagado] para apagar la lámpara.

Nota: la lámpara se apaga automáticamente transcurridos 30 minutos.

Utilizar la lupa luminosa

Si normalmente necesita gafas para leer, no es necesario que se las quite. La lupa luminosa está diseñada para que pueda utilizarse junto con las gafas de lectura.

1. Coloque la lupa luminosa sobre el objeto de lectura de forma que la lente quede orientada hacia Ud.
2. Encienda la iluminación.
3. Varíe la distancia del ojo respecto al objeto de lectura hasta que vea la imagen con nitidez. La distancia correcta varía de una persona a otra. Esta dependerá de las gafas de lectura que use y de la capacidad de adaptación de sus ojos. El valor orientativo de la distancia es de 200 mm.
4. Desconecte la iluminación tras la utilización.

Ajuste de la intensidad luminosa

- ✓ La iluminación está activada.
- 1. Mantenga pulsado el botón de *[Encendido/Apagado]* **B**.
- ⇒ Transcurridos unos 3 segundos, la intensidad luminosa cambia entre el 100 %, el 75 % y el 50 %.
- 2. Suelte el botón de *[Encendido/Apagado]* cuando alcance la intensidad de luz deseada.

Ajustar la temperatura de color

Es posible ajustar las siguientes temperaturas de color:

- 6000 K: luz blanca fría
- 4700 K: luz blanca neutra
- 2800 K: luz blanca cálida
- ✓ La iluminación está desactivada.
- 1. Mantenga pulsado el botón de *[Encendido/Apagado]* **B**.
- ⇒ Transcurridos unos 3 segundos, la temperatura de color cambia entre 6000 K, 4700 K y 2800 K.
- 2. Suelte el botón de *[Encendido/Apagado]* cuando alcance la temperatura de color deseada.

Utilizar el adaptador

Para leer en un ángulo más cómodo, puede utilizar la lupa iluminada con el adaptador suministrado.

Colocar el adaptador

1. Coloque la lupa luminosa con la punta de la base **D** en el adaptador.
2. Presione la parte trasera de la lupa luminosa cuidadosamente hacia abajo.
- ⇒ La lupa luminosa encaja en el adaptador.

Retirar el adaptador

1. Sujete el adaptador con una mano y el soporte con la otra.
2. Tire de la parte posterior del adaptador hacia abajo y retírela del soporte.

Datos técnicos

Aumento	
N.º de art 156514	2,8 ×
Fuente de luz	
Fuente de iluminación	LED (Grupo de riesgo 1 según la norma EN 62471)
Alimentación eléctrica:	
Pilas	3 × Mignon (AA/LR6) / 1,5 V
Condiciones ambientales	
Temperaturas de funcionamiento	0 °C ... 40 °C

Limpieza y mantenimiento

1. Asegúrese de que la lupa luminosa está desactivada.
2. Limpie la lente con un paño suave sin pelusa, p. ej., un paño de microfibra.
3. En caso de suciedad más persistente, como huellas dactilares, humedezca ligeramente el paño. No utilice soluciones jabonosas que contengan plastificantes, disolventes alcohólicos o productos de limpieza abrasivos.
4. Mantenga la lupa luminosa tapada cuando no la utilice o coloque la bolsa de microfibra incluida sobre la lente de la lupa.

Eliminación

Eliminación de aparatos eléctricos



Este producto está sometido a la Directiva europea sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en su versión actualmente vigente. El producto no debe eliminarse junto con los residuos domésticos normales.

Elimine el producto o las partes del mismo a través de una empresa de eliminación de residuos autorizada o en su centro municipal de eliminación de residuos. Respete la normativa vigente actualmente. En caso de duda, póngase en contacto con su organización de eliminación de residuos. Elimine todos los materiales de embalaje de forma respetuosa con el medio ambiente.

Eliminación de pilas y baterías



Las pilas y baterías no debe eliminarse junto con los residuos domésticos.

Para su eliminación, extraiga las pilas o baterías del aparato y entréguelas en un punto de recogida oficial.

Declaración de conformidad

El producto cumple todos los requisitos de las directivas de la UE y las normativas nacionales aplicables. Lo anterior queda confirmado por su marcado CE. Puede descargar la declaración de conformidad de este producto en el siguiente sitio web: <http://www.eschenbach-vision.com/de-DE/konformitaetserklaerungen>.

Garantía

Eschenbach Optik GmbH garantiza el funcionamiento del producto descrito en el presente manual de instrucciones dentro del ámbito de las disposiciones legales con respecto a cualquier defecto que se produzca debido a fallos de fabricación o defectos del material. Los daños derivados de una manipulación inadecuada, incluidos los daños causados por caídas o golpes, no quedan cubiertos por la garantía. La garantía solo puede reclamarse previa presentación del comprobante de compra.

Nederlands

Omtrent deze gebruiksaanwijzing

Deze gebruiksaanwijzing geldt voor het volgende product:

Lichtloep scribolux

Nr.
No.

Vergroting 2,8 ×

156514

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig voordat u het hierin beschreven product gebruikt. Bewaar de gebruiksaanwijzing zorgvuldig. Als u het product doorgeeft, geef dan ook deze gebruiksaanwijzing mee.

De volgende tekens en symbolen worden in deze gebruiksaanwijzing en/of op het product gebruikt:

Symbool	Betekenis
	Algemene waarschuwing voor een gevaarlijk punt
	Voer het product af volgens de lokale richtlijnen
	Fabrikant: zie achterzijde

Veiligheidsvoorschriften

 De bureaulamp is ontworpen volgens de nieuwste technologie en voldoet aan de geldende Europese richtlijnen. Toch zijn er nog steeds risico's. Om gevaren te voorkomen, dient u de veiligheidsvoorschriften na te leven. Wijs ook andere personen op deze gevaren.

Tijdens het hanteren van de bureaulamp kunnen kinderen zich kwetsen. Laat kinderen nooit zonder toezicht met het verpakkingsmateriaal en de bureaulamp spelen.

Het product is een medisch hulpmiddel van klasse I (niet steriel, zonder meetfunctie) en voldoet aan de Verordening (EU) 2017/745. Bij gebruik van het product buiten de EU-lidstaten moeten de desbetreffende nationale richtlijnen in acht worden genomen.

Gevaar tijdens het hanteren van het product

- Laat optische lenzen nooit zonder afdekking in de zon liggen. Door het brandglaseffect van de lenzen bestaat er brandgevaar.

- Kijk nooit met optische producten in de zon.

Kijk niet direct in de lichtbronnen van het product (risicogroep 1 volgens EN 62471).

Risico op materiële schade

- Bescherm het product tegen stoten, schokken, vochtigheid en overmatige warmte.
- Zet het product niet in de buurt van een warmtebron of in direct zonlicht.
- Reinig het product niet onder stromend water of in een ultrasoonbad.
- Gebruik voor het reinigen geen zeepoplossingen die weekmakers, alcoholische oplosmiddelen of schurende reinigingsmiddelen bevatten.

Gevaar tijdens het hanteren van batterijen

- Controleer regelmatig de batterijen. Lekkende batterijen kunnen het product beschadigen en bij contact met de huid irritatie veroorzaken.
- Verwijder de batterijen uit het batterijvak zodra ze leeg zijn of wanneer u het product lange tijd niet gebruikt.
- Zorg ervoor dat de batterijen op de juiste manier worden weggegooid. Batterijen mogen niet met het huisvuil worden weggegooid.

Gebruik in overeenstemming met de bestemming

Het product is bedoeld voor het vergroten van lees- en werkzones. Hij is uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis, in droge ruimten.

Gebruik de bureaulamp alleen zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing. Elk ander gebruik geldt als niet in overeenstemming met de bestemming en kan leiden tot materiële schade of zelfs lichamelijk letsel. Voer geen modificaties uit aan de constructie van de bureaulamp. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit gebruik dat niet in overeenstemming is met de bestemming of incorrect gebruik.

Productbeschrijving

Lichtloep

A Lens	B Knop [aan/uit]
C Batterijvak	D Standaard
E Adapter	

Gebruik

Batterijen plaatsen / vervangen



- Gebruik altijd 3 nieuwe batterijen van hetzelfde type.
- Let op de positie van de pluspool.

1. Schakel de verlichting van de loep uit met de knop [aan/uit] **B**.
 2. Trek het batterijvak **C** omhoog, van de vergrootlamp af.
 3. Verwijder de gebruikte batterijen uit het batterijvak.
 4. Plaats de nieuwe batterijen in het batterijvak.
- ⇒ De minpool van de batterij moet in de richting van de veer van het batterijvak wijzen.
5. Bevestig het batterijvak aan de bovenkant van de bevestigingsplaat en schuif het batterijvak naar beneden totdat het vastklikt.

De lichtloep in- en uitschakelen

1. Druk op de knop [aan/uit] **B** om de verlichting in te schakelen.
2. Druk nogmaals op de knop [aan/uit] om de verlichting uit te schakelen.

Let op: na 30 minuten schakelt de verlichting automatisch uit.

De lichtloep gebruiken

Als u normaal een bril draagt om te lezen, hoeft u deze niet af te nemen. De lichtloep is zo ontworpen dat u deze ook samen met uw leesbril kunt gebruiken.

1. Plaats de lichtloep op het leesmateriaal, zodat de lens naar u wijst.
2. Zet de verlichting aan.
3. Varieer de afstand van het oog tot de lichtloep totdat het leesmateriaal er scherp uit ziet. De juiste afstand verschilt van persoon tot persoon. Deze is afhankelijk van de gebruikte leesbril en het aanpassingsvermogen van uw ogen. De richtwaarde voor de afstand is 200 mm.
4. Schakel de verlichting uit na gebruik.

Lichtintensiteit instellen

- ✓ De verlichting is ingeschakeld.
1. Houd de knop *[aan/uit]* **B** ingedrukt.
⇒ Na ca. 3 seconden schakelt de lichtintensiteit tussen 100 %, 75 % en 50 %.
 2. Laat de knop *[aan/uit]* los wanneer de gewenste lichtintensiteit is bereikt.

Kleurtemperatuur instellen

U kunt de volgende kleurtemperaturen instellen:

- 6000 K: koel wit licht
 - 4700 K: neutraal wit licht
 - 2800 K: warm wit licht
 - ✓ De verlichting is uitgeschakeld.
1. Houd de knop *[aan/uit]* **B** ingedrukt.
⇒ Na ca. 3 seconden schakelt de kleurtemperatuur tussen 6000 K, 4700 K en 2800 K.
 2. Laat de knop *[aan/uit]* los wanneer de gewenste kleurtemperatuur is bereikt.

Adapter gebruiken

Voor een comfortabelere schuine kijkhoek kunt u de lichtloep gebruiken met de meegeleverde adapter.

Adapter plaatsen

1. Plaats de lichtloep met de punten van het standaardvoet **D** op de adapter.
2. Druk de lichtloep voorzichtig naar beneden aan de achterkant.
⇒ De lichtloep klikt vast op de adapter.

Adapter verwijderen

1. Pak de adapter met één hand vast en het standaardvoet met de andere hand.
2. Trek de adapter naar beneden van het standaardvoet af.

Technische gegevens

Vergroting	
Artikelnr. 156514	2,8 ×
Lichtbron	
Lichtmiddel	LED (Risicogroep 1 volgens EN 62471)
Spanningstoevoer	
Batterij	3 × Mignon (AA/LR6) / 1,5 V
Omgevingsomstandigheden	
Bedrijfstemperatuur	0 °C ... 40 °C

Schoonmaak en onderhoud

1. Zorg ervoor dat de lichtloep is uitgeschakeld.
2. Reinig de lens met een zachte, pluisvrije doek, bijv. een microvezeldoek.
3. Bij sterkere vervuiling, zoals vingerafdrukken, bevochtigt u de doek licht. Gebruik geen zeepoplossingen die weekmakers, alcoholische oplosmiddelen of schurende reinigingsmiddelen bevatten.
4. Bewaar de lichtloep bedekt of trek de meegeleverde microvezel zak over de lens van de loep wanneer u het niet gebruikt.

Afvoeren

Elektrische apparaten afvoeren



Dit product valt onder de Europese richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparaten in de momenteel geldende versie. Deponeer het product in geen geval bij het gewone huisvuil.

Voer het product of delen ervan af via een erkend afvalverwerkingsbedrijf of via het recyclagepark in uw gemeente. Leef de momenteel geldende voorschriften na. Neem bij twijfel contact op met uw recyclagepark. Voer alle verpakkingsmateriaal op milieuvriendelijke wijze af.

Batterijen en accu's afvoeren



Batterijen en accu's mogen niet bij het gewone huisvuil worden afgevoerd.

Om de batterijen of accu's af te voeren, verwijdt u ze uit het apparaat en levert u ze in bij een officieel recyclagepark.

Conformiteitsverklaring

Het product voldoet aan alle eisen van de geldende EU-richtlijnen en nationale voorschriften. Dit bevestigen wij met de CE-markering. U kunt de conformiteitsverklaring voor dit product raadplegen op de volgende website: <http://www.eschenbach-vision.com/de-DE/konformitaetserklaerungen>.

Garantie

Eschenbach Optik GmbH garandeert in het kader van de wettelijke bepalingen de werking van het in deze gebruiksaanwijzing beschreven product met betrekking tot het ontstaan van gebreken die te wijten zijn aan fabrieksfouten of materiaalfouten. Bij schade als gevolg van ondeskundig gebruik, vallen of stoten, bestaat er geen aanspraak op garantie. Garantie wordt alleen verleend na het voorleggen van een aankoopbewijs.

Om denne vejledning

Denne vejledning gælder for følgende produkt:

Lup med lys scribolux

Nr.
No.

Forstørrelse 2,8 ×

156514

Læs denne vejledning grundigt igennem, inden produktet, der beskrives heri, tages i brug. Opbevar vejledningen omhyggeligt. Hvis produktet overdrages til andre, skal denne vejledning følge med.

De følgende tegn og symboler anvendes i denne vejledning og/eller på produktet:

Symbol	Betydning
	Generel advarsel mod et risikomoment
	Bortskaf produktet i henhold til de lokale forskrifter
	Fabrikant: se bagsiden

Sikkerhedsanvisninger

 Produktet er konstrueret efter de nyeste tekniske principper og overholder de gældende europæiske direktiver. Alligevel findes der tilbageværende risici. For at undgå risici skal sikkerhedsanvisningerne følges. Andre personer skal også gøres opmærksomme på disse risici.

Ved håndtering af produktet kan børn komme til skade. Lad aldrig børn uden opsyn lege med emballagematerialet eller med produktet.

Produktet er medicinsk udstyr iht. klasse 1 (ikke-sterilt, uden målefunktion) i henhold til forordning (EU) 2017/745. Ved brug af produktet uden for EU-medlemsstaterne skal retningslinjerne i de enkelte lande overholdes.

Risici i forbindelse med brug af produktet

- Lad aldrig de optiske linser ligge i solen, uden at de er tildækkede. Der er risiko for brand som følge af linsernes brændglasvirkning.
- Se aldrig ind i solen igennem die optiske produkter.

Se ikke direkte ind i produktets lyskilder (risikogruppe 1 iht. EN 62471).

Risiko for materielle skader

- Beskyt produktet mod stød og slag, fugt og høje temperaturer.
- Læg aldrig produktet i nærheden af varmekilder eller i direkte sollys.
- Rengør ikke produktet med rindende vand eller i ultralydsbad.
- Brug ikke opløsninger med sæbe, der indeholder blødgøringsmidler, ikke alkoholholdige opløsningsmidler og ingen slibende rengøringsmidler til rengøring.

Risici i forbindelse med brug af batterier

- Kontroller batterierne jævnligt. Batterier, hvor indholdet er lækket, kan beskadige produktet, og ved kontakt med huden kan der forekomme irritation.
- Tag batterierne ud af batterirummet, så snart de er opbrugt, eller hvis du ikke vil bruge produktet i længere tid.
- Sørg for en forskriftsmæssig bortskaffelse af batterierne. Batterier må ikke komme med i husholdningsaffaldet.

Tilsigtet anvendelse

Produktet er beregnet til forstørrelse af et læse- og arbejdsområde. Det er udelukkende beregnet til indendørs brug i tørre rum.

Brug kun produktet som beskrevet i denne betjeningsvejledning. Enhver anden anvendelse betragtes som værende uden for anvendelsesområdet og kan give anledning til materielle skader eller personskader. Udfør ikke ændringer af produktets konstruktion. Producenten påtager sig ikke noget ansvar for skader, der opstår som følge af utilsigtet eller forkert brug.

Produktbeskrivelse

Lup med lys

- | | |
|---------------------|------------------------|
| A Linse | B Tast [ON/OFF] |
| C Batterirum | D Sokkel |
| E Adapter | |

Drift

Isætning / udskiftning af batterier



- Brug altid 3 ens, nye batterier.
- Overhold placeringen af den enkelte pluspol.

1. Sluk for lyset i luppen ved hjælp af tasten [ON/OFF] **B**.
2. Træk batterirummet **C** opad og af luppen.
3. Fjern de opbrugte batterier fra batterirummet.
4. Sæt de nye batterier i batterirummet.
⇒ Batteriets minuspol skal vende mod fjederen i batterirummet.
5. Sæt batterirummet an mod overkanten af pladen til fastgørelse og skub batterirummet nedad til anslag.

Tænd og sluk lampeluppen

1. Tryk på tasten [ON/OFF] **B** for at tænde for lyset.
2. Tryk igen på tasten [ON/OFF] for at slukke lyset.

Bemærk: Efter 30 minutter slukkes lyset automatisk.

Anvendelse af lampeluppen

Hvis du normalt bruger briller, behøver du ikke tage dem af. Lampeluppen er konstrueret på en sådan måde, at den kan bruges sammen med dine læsebriller.

1. Stil lampeluppen på den plane, flade side sådan på objektet, at linsen vender hen imod dig selv.
2. Tænd for lyset.
3. Skift afstanden fra øjet til luppen, indtil objektet ses skarpt. Den rigtige afstand er forskellig fra person til person. Den afhænger af de anvendte læsebriller og af dine øjnes tilpasningsevne. Den vejledende afstand er på 200 mm.
4. Sluk for lyset efter anvendelsen.

Indstilling af lysstyrken

- ✓ Lyset er tændt.
1. Hold tasten **[ON/OFF]** **B** trykket ind.
⇒ Efter ca. 3 sek. vil lysstyrken skifte mellem 100 %, 75 % og 50 %.
 2. Slip tasten **[ON/OFF]**, når den ønskede lysstyrke er nået.

Indstilling af farvetemperatur

Følgende farvetemperaturer kan indstilles:

- 6000 K: koldt hvidt lys
- 4700 K: neutralt hvidt lys
- 2800 K: varmt hvidt lys

✓ Lyset er slukket.

1. Hold tasten **[ON/OFF]** **B** trykket ind.
⇒ Efter ca. 3 sek. vil farvetemperaturen skifte mellem 6000 K, 4700 K og 2800 K.
2. Slip tasten **[ON/OFF]**, når den ønskede farvetemperatur er nået.

Anvendelse af adapter

For nemt at opnå et skråt indblik kan lampeluppen anvendes sammen med den medfølgende adapter.

Avendelse af adapter

1. Sæt lampeluppen med spidserne af foden **D** på adapteren.
2. Tryk forsigtigt den bageste del af luppen nedad.
⇒ Luppen går i hak i adapteren.

Fjernelse af adapteren

1. Tag fat i adapteren med den ene hånd og i foden med den anden hånd.
2. Træk adapteren af foden i nedadgående retning bagtil.

Tekniske data

Forstørrelse	
Art.-nr. 156514	2,8 ×
Lyskilde	
Lyskilde	LED (risikogruppe 1 iht. EN 62471)
Spændingsforsyning	
Batteri	3 × Mignon (AA/LR6) / 1,5 V
Omgivelsesbetingelser	
Driftstemperaturer	0 °C ... 40 °C

Rengøring og vedligeholdelse

1. Sørg for, at lampeluppen er slukket.
2. Rens linsen med en blød, fnugfri klud, for eksempel en mikrofiberklud.
3. Stærkere tilsmudsninger, for eksempel fingeraftryk, kan fjernes med en let fugtig klud. Brug ikke opløsninger med sæbe, der indeholder blødgøringsmidler, ikke alkoholholdige opløsningsmidler og ingen slibende rengøringsmidler.
4. Opbevar lampeluppen tildækket eller træk den medfølgende mikrofiberpose over luppens linse, når den ikke er i brug.

Bortskaffelse

Bortskaffelse af elektrisk udstyr



På dette produkt finder det europæiske direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr i den til hver tid gældende seneste version anvendelse. Produktet må ikke bortskaffes med det normale husholdningsaffald.

Bortskaf produktet eller dele heraf via en godkendt genbrugsvirksomhed eller via den lokale kommunale ordning for bortskaffelse. Overhold de til enhver tid gældende bestemmelser. Kontakt i tvivlstilfælde den lokale kommunale ordning for bortskaffelse. Bortskaf alle emballagematerialer på en miljømæssig korrekt måde.

Bortskaffelse af batterier og genopladelige batterier



Batterier og genopladelige batterier må ikke bortskaffes med det normale husholdningsaffald.

Før bortskaffelse fjernes batterier og genopladelige batterier fra udstyret og afleveres til et officielt indsamlingssted.

Overensstemmelseserklæring

Produktet opfylder alle krav i de gældende EU-direktiver og nationale forskrifter. Dette bekræfter vi med CE-mærkningen. Overensstemmelseserklæringen for dette produkt kan hentes på følgende websted: <http://www.eschenbach-vision.com/de-DE/konformitaetserklaerungen>.

Garanti

Eschenbach Optik GmbH yder inden for rammerne af de lovmæssige bestemmelser på det i denne vejledning beskrevne produkt en garanti for mangler, der skyldes fabrikationsfejl eller materialefejl. For skader som følge af forkert håndtering og for skader som følge af fald eller stød kan der ikke gøres garantikrav gældende. Kun hvis der fremlægges kvittering for køb, kan der gøres garantikrav gældende.

Om denna anvisning

Denna bruksanvisning gäller för följande produkt:

Ljuslupp scribolux

Nr.
No.

Förstoring 2,8 ×

156514

Läs igenom denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda produkten. Spara bruksanvisning på en säker plats. Om produkten överlämnas till en ny ägare ska även denna bruksanvisning medfölja.

I den här bruksanvisningen och/eller på produkten används följande tecken och symboler:

Symbol	Betydelse
	Allmän varning för ett riskställe
	Bortskaffa produkten enligt lokala riktlinjer
	Tillverkare: se baksidan

Säkerhetsanvisningar



Produkten är tillverkad enligt senaste tekniska standard och överensstämmer med tillämpliga EU-direktiv. Trots det kan det uppstå restrisker vid användning. För att undvika risker måste du följa säkerhetsanvisningarna.

Uppmärksamma även andra personer på dessa risker.

Barn kan skada sig när de hanterar produkten. Låt aldrig barn leka utan uppsikt med förpackningsmaterial eller själva produkten.

Produkten är en medicinsk produkt i klass I (ej steril, utan mätfunktion) och uppfyller kraven i direktivet (EU) 2017/745. Vid användning av produkten utanför EU:s medlemsstater skall de respektive nationella riktlinjerna beaktas.

Fara vid hantering av produkten

- Låt aldrig optiska linser ligga i solen utan övertäckning. På grund av brännglaseffekten finns risk för brand.
- Titta aldrig in i solen med optiska produkter.
Titta inte in direkt i produktens ljuskällor (riskgrupp 1 enligt EN 62471).

Risk för materiella skador

- Skydda produkten mot stötar eller slag, fukt och överdrivet hög värme.
- Placera aldrig produkten nära värmekällor eller i direkt solljus.
- Produkten får inte rengöras under rinnande vatten eller i ultraljudsbad.
- Använd inte tvällösningar med mjukgörare, alkoholhaltiga lösningsmedel eller skurande rengöringsmedel.

Fara vid hantering av batterier

- Kontrollera regelbundet batterierna. Utrinnande batterier kan förorsaka skador på produkten och leda till retningar vid hudkontakt.
- Ta ut batterierna ur batterifacket, om du inte använder produkten under en längre tid.
- Se till att batterierna avfallshanteras korrekt. Batterier får inte blandas hushållssopor.

Avsedd användning

Produkten används för att förstora ett läs- och arbetsområde. Den lämpar sig endast för inomhusbruk i torra rum.

Använd produkten uteslutande enligt beskrivningen i den här bruksanvisningen. All annan användning räknas som ej avsedd och kan leda till personskador och materiella skador. Gör inga ändringar i produktens konstruktion. Tillverkaren ansvarar inte för skador som orsakats av ej avsedd eller felaktig användning.

Produktbeskrivning

Ljuslupp

A Lins	B Knappen [På/Av]
C Batterifack	D Fot
E Adapter	

Drift

Sätta i/byta batterier



- Använd alltid 3 identiska nya batterier.
- Beakta den respektive pluspolens position.

1. Släck ljusluppens belysning med knappen [På/Av] **B**.
2. Dra av batterifacket **C** uppåt från ljusluppen.
3. Ta ut de förbrukade batterierna från batterifacket.
4. Sätt in de nya batterierna i batterifacket.
⇒ Batteriets minuspole pekar mot batterifackets fjäder.
5. Sätt an batterifacket mot fästplattans överkant och skjut batterifacket ända tills det tar stopp.

Tända och släcka ljusluppen

1. Tryck på knappen [På/Av] **B**, för att tända belysningen.
2. Tryck på knappen [På/Av] för att släcka belysningen.

Anmärkning: Efter 30 minuter släcks belysningen automatiskt.

Använda ljuslupp

Om du i vanliga fall behöver glasögon så behöver du inte ta av dessa.

Ljusluppen är konstruerad på ett sådant sätt att den kan användas tillsammans med dina läsglasögon.

1. Placera ljusluppen på det som skall läsas på ett sådant sätt att linsen pekar mot dig.
2. Tänd belysningen.
3. Variera avståndet från ögat och till ljusluppen tills du ser det som skall läsas skarpt. Rätt avstånd är individuellt. Det beror på de använda läsglasögonen och dina ögons anpassningsförmåga. Riktvärdet för avståndet är 200 mm.
4. Släck belysningen efter användningen.

Ställa in ljusintensiteten

✓ Belysningen är tänd.

1. Håll knappen [På/Av] **B** intryckt.

⇒ Efter ca. 3 sek. kopplas ljusintensiteten om mellan 100 %, 75 % och 50 %.

2. Släpp knappen [På/Av] tills den önskade ljusintensiteten har uppnåtts.

Ställa in färgtemperaturen

Du kan ställa in följande färgtemperaturer:

- 6000 K: kallvitt ljus
- 4700 K: neutralvitt ljus
- 2800 K: varmvitt ljus

✓ Belysningen är släckt.

1. Håll knappen [På/Av] **B** intryckt.

⇒ Efter ca. 3 sek. kopplas färgtemperaturen om mellan 6000 K, 4700 K och 2800 K.

2. Släpp knappen [På/Av] tills den önskade ljusintensiteten har uppnåtts.

Använda adapter

För en bekvämare vinklad blickriktning kan ljusluppen användas med den medföljande adaptern.

Sätta in adaptern

1. Placera ljusluppen med fotens **D** spetsar på adaptern.
2. Tryck ljusluppen baktills försiktigt nedåt.

⇒ Ljusluppen hakar i adaptern.

Ta bort adaptern

1. Fatta tag i adaptern med en hand och foten med den andra handen.
2. Dra av adaptern baktills och nedåt från foten.

Tekniska specifikationer

Förstoring	
Art.-nr. 156514	2,8 ×
Ljuskälla	
Ljuskälla	LED (riskgrupp 1 enligt EN 62471)
Spänningsförsörjning	
Batteri	3 batterier (AA/LR6) / 1,5 V
Omgivningsförutsättningar	
Driftstemperaturer	0 °C ... 40 °C

Rengöring och underhåll

1. Kontrollera att ljusluppen är släckt.
2. Rengör linsen med en mjuk och luddfri duk, t. ex. en mikrofiberduk.
3. Vid kraftigare nedsmutsning, t. ex. fingeravtryck, fuktar du duken något. Använd inte tvållösningar som innehåller mjukgörare, alkoholhaltiga lösningsmedel eller slipande rengöringsmedel.
4. Förvara ljusluppen övertäckt eller dra över den medföljande mikrofiberpåsen över luppens lins.

Bortskaffande

Bortskaffande av elektrisk utrustning



Denna produkt regleras av EU-direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter i gällande version. Produkten får inte kastas i hushållsavfallet.

Produkten eller dess delar ska bortskaffas av godkänt avfallshanteringsbolag eller hos din kommunala avfallsanläggning. Beakta gällande bestämmelser. Om du är osäker, kontakta din avfallsanläggning. Allt förpackningsmaterial ska kasseras på ett miljövänligt sätt.

Bortskaffande av batterier och laddningsbara batterier



Släng inte batterier i hushållsavfallet. För avfallshantering tar du ut batterierna ur produkten och lämnar in dem på godkänd uppsamlingsplats.

Försäkran om överensstämmelse

Produkten uppfyller alla krav i tillämpliga EU-direktiv och nationella föreskrifter. Detta bekräftas av CE-märkningen. Försäkran om överensstämmelse för denna produkt finns här: <http://www.eschenbach-vision.com/de-DE/konformitaetserklaerungen>.

Garanti

Eschenbach Optik GmbH ger inom ramen för de lagstadgade bestämmelserna en garanti för den produkt som beskrivs i denna bruksanvisning. Garantin täcker defekter på grund av tillverknings- eller materialfel. Garantin omfattar inte skador som uppstår till följd av felaktig hantering, inklusive fall eller stötar. Garantin kan endast utnyttjas mot uppvisande av kvitto.

Norsk

Om denne anvisningen

Denne anvisningen gjelder for følgende produkt:

Lyslupe scribolux

Nr.
No.

Forstørrelse 2,8 ×

156514

Les anvisningen nøye gjennom før du bruker produktet som beskrives her. Ta godt vare på bruksanvisningen. Hvis du gir produktet videre, overlever også denne anvisningen.

De følgende tegn og symboler blir brukt i denne anvisningen og/eller på produktet:

Symbol	Betydning
	Generell advarsel mot et farested
	Kasser produktet etter de lokale retningslinjene
	Produsent: se baksiden

Sikkerhetsinformasjon

 Produktet er konstruert etter dagens tekniske standard og i samsvar med gjeldende EU-direktiver. Likevel finnes det restfarer. For å unngå farer må du følge sikkerhetsanvisningene. Gjør også andre personer oppmerksomme på disse farene.

Ved omgang med produktet kan barn skade seg. La aldri barn leke med emballasjen og produktet uten tilsyn.

Produktet er et medisinsk produkt i klasse I (ikke sterilt, uten målefunksjon) og samsvarer med forordningen (EU)

2017/745. Ved bruk av produktet utenfor EU/EØS medlemsland må de respektive landsspesifikke direktivene følges.

Fare ved håndtering av produktet

- La aldri optiske linser ligge i sollys uten tildekning. Brennglasseffekten av linsene vil føre til brannfare.
- Se aldri rett mot solen med optiske produkter.
Se aldri rett inn i lyskilden på produktet (risikogruppe 1 i henhold til EN 62471).

Fare for materielle skader

- Beskytt produktet mot støt eller slag, fuktighet og overdreven varme.
- Legg aldri produktet i nærheten av varmekilder eller i direkte sollys.
- Ikke rengjør produktet under rennende vann eller i ultralydbad.
- For rengjøring, ikke bruk såpeløsninger som inneholder mykner, ikke bruk alkoholholdige løsemidler eller skurende rengjøringsmidler.

Fare ved håndtering av batterier

- Kontroller batteriene regelmessig. Utladete batterier kan føre til skader på produktet og til irritasjon ved hudkontakt.
- Ta batteriene ut av batterihuset når de er utløpt eller når produktet ikke skal brukes på lang tid.
- Sørg for forskriftsmessig deponering av brukte batterier. Batterier skal ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall.

Tiltenkt bruk

Produktet er beregnet til forstørrelse av et lese- og arbeidsområde. Det er utelukkende egnet til bruk innendørs i tørre rom.

Bruk produktet kun slik som beskrevet i denne anvisningen. Annen bruk anses som uhensiktsmessig og kan føre til skade på eiendom eller personer. Ikke foreta endringer på konstruksjonen til produktet. Det tas intet ansvar for skader som oppstår som følge av uhensiktsmessig eller feil bruk.

Produktbeskrivelse

Lyslupe

I Linse	B Tast [På/Av]
C Batterihus	D Fot
E Adapter	

Drift

Sette inn eller skifte batterier



- Bruk alltid 3 like og nye batterier.
- Pass alltid på posisjon av pluss-polen.

1. Slå av lyset på lyslupen med tasten [På/Av] **B**.
2. Skyv batterihuset **C** opp og av lyslupen.
3. Ta brukte batterier ut av batterihuset.
4. Sett nye batterier inn i batterihuset.
⇒ Minuspoleen på batteriet skal peke mot fjæren i batterihuset.

5. Sett batterihuset mot overkanten av festeplaten og skyv batterihuset ned til anslag.

Slå lyslupen på og av

1. Trykk på tasten [På/Av] **B** for å slå på lyset.
2. Trykk på tasten [På/Av] på nytt for å slå av lyset.

Merk: Etter 30 minutter slås belysningen av automatisk.

Bruke lyslupen

Dersom du vanligvis må bruke briller ved lesing, trenger du ikke ta dem av. Lyslupen er utformet slik at den kan brukes sammen med brillene dine.

1. Sett lyslupen på det du skal lese, slik at lyslupen er vinklet litt mot deg selv.
2. Slå på belysningen.
3. Varier avstanden mellom øyne og lyslupen slik at du ser lesestoffet skarpt. Den riktige avstanden må reguleres individuelt. Den er avhengig av lesebrillene dine og av tilpasningsevnen på øynene dine. Retningsgivende avstand er på 200 mm.
4. Slå av lyset etter bruk.

Stille inn lysstyrke

✓ Belysningen er slått på.

1. Hold tasten [På/Av] **B** inntrykket.
⇒ Etter ca. 3 sekunder blir lysstyrken koblet mellom 100 %, 75 % og 50 %.
2. Trykk på tasten [På/Av] når ønsket lysstyrke er nådd.

Stille inn fargetemperatur

Du kan stille inn følgende fargetemperaturer:

- 6000 K: kaldthvitt lys
- 4700 K: nøytralhvitt lys
- 2800 K: varmhvitt lys

✓ Belysningen er slått av.

1. Hold tasten **[På/Av]** **B** inntrykket.

⇒ Etter ca. 3 sekunder blir fargetemperaturen koblet mellom 6000 K, 4700 K og 2800 K.

2. Trykk på tasten **[På/Av]** når ønsket fargetemperatur er nådd.

Bruke adapter

For en mer behagelig skrå synsstilling kan lyslupen brukes med den medfølgende adapteren.

Sette på adapter

1. Sett lyslupen med spissene på foten **D** på adapteren.

2. Trykk bakenden av lyslupen forsiktig ned.

⇒ Lyslupen låses fast på adapteren.

Ta av adapter

1. Grip adapteren med en hånd og foten med den andre hånden.

2. Trekk bakenden av adapteren ned av foten.

Tekniske data

Forstørrelse

Art.nr. 156514 2,8 ×

Lyskilde

Lampe LED (Risikogruppe 1 i henhold til EN 62471)

Strømforsyning

Batterier 3 × Mignon (AA/LR6) / 1,5 V

Omgivelsesforhold

Driftstemperaturer 0 °C ... 40 °C

Rengjøring og pleie

1. Forsikre deg om at lyslupen er slått av.

2. Rengjør linsen med en myk, lofri klut, for eksempel en mikrofiberklut.

3. Ved mye skitt, for eksempel fingeravtrykk, fukt kluten litt. Ikke bruk såpeløsninger som inneholder mykner, ikke bruk alkoholholdige løsemidler eller skurende rengjøringsmidler.

4. Når lyslupen ikke er i bruk skal den oppbevares tildekt eller trekk den medfølgende mikrofiberposen over linsen på lupen.

Avfallshåndtering

Avfallshåndtering av elektriske apparater



Dette produktet underliggjer det europeiske direktivet om gamle elektriske og elektroniske apparater i den aktuelt gjeldende utgaven. Dette produktet skal ikke kastes sammen med normalt husholdningsavfall.

Kast produktet eller deler av dette ved en godkjent avfallshåndteringsbedrift eller via kommunalt innsamlingssted. Overhold aktuelt gjeldende forskrifter. Ved tvil ta kontakt med renholdsverket. Sørg for å avfallshåndtere alle pakningsmaterialer på miljøvennlig måte.

Avfallshåndtering av batterier og oppladbare batterier



Batterier og oppladbare batterier skal ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall.

For avfallshåndtering tar du batteriene eller de oppladbare batteriene ut av apparatet og leverer de ved et offisielt innsamlingssted.

Samsvarserklæring

Produktet oppfyller kravene i de gjeldende EU-direktiver og nasjonale forskrifter. Dette bekrefter vi gjennom CE-merkingen. Du kan hente samsvarserklæringen for dette produktet på følgende nettsted: <http://www.eschenbach-vision.com/de-DE/konformitaetserklaerungen>.

Garanti

Eschenbach Optik GmbH garanterer innenfor rammene av lovbestemmelser funksjonen av produktet beskrevet i denne anvisningen med hensyn til forekommende mangler som skyldes fabrikasjonsfeil eller materialfeil. Ved skader som følge av feil behandling, også ved skade på grunn av fall eller støt, bortfaller ethvert garantikrav. Garantien kan kun kreves ved fremleggelse av kjøpskvitteringen.

Suomalainen

Tästä ohjeesta

Tämä ohje koskee seuraavaa tuotetta:

Valollinen suurennuslasi
scribolux

Nr.
No.

Suurennus 2,8 ×

156514

Lue tämä ohje huolellisesti läpi ennen kuin alat käyttää ohjeessa kuvattua tuotetta. Varmista, ettei ohje pääse katoamaan. Jos annat tuotteen eteenpäin, anna ohje sen mukana.

Tässä ohjeessa ja/tai tuotteessa käytetään seuraavia merkkejä ja kuvakkeita:

Kuvake	Merkitys
	Yleinen varoitus vaarasta
	Hävitä tuote paikallisten säädösten mukaisesti
	Valmistaja: katso takasivu

Turvallisuusohjeet

 Tuote on valmistettu viimeisimmän teknologisen tietämyksen mukaisesti ja sitä koskevien EU:n direktiivien mukainen. Silti tuotteen käyttöön liittyy jäännösvaaroja. Jotta voisit välttää vaaratilanteet, tutustu turvallisuusohjeisiin. Kerro myös muille käyttäjille näistä vaaroista.

Laitteen käyttäminen saattaa olla vahingollista lapsille. Älä koskaan anna lasten leikkiä pakkausmateriaaleilla ilman valvontaa.

Tuote on luokan I lääkinnällinen laite (ei-steriili, ei mittaustoimintoa) ja asetuksen (EU) 2017/745 vaatimusten mukainen. Jos tuotetta käytetään EU:n jäsenvaltioiden ulkopuolella, maakohtaiset säädökset on otettava huomioon.

Tuotteen käytöstä johtuva vaara

- Älä koskaan jätä optisia linssejä ilman suojusta auringonpaisteeseen. Linssien ”polttolasi-ilmiö” aiheuttaa tulipalovaaran.
- Älä koskaan katso optisilla tuotteilla aurinkoon.
Älä koskaan katso suoraan tuotteen valonlähteisiin (riskiryhmä 1 standardin EN 62471 mukaan).

Laitevaurioiden vaara

- Suojaa tuote tönäisyyiltä ja iskuilta, kosteudelta ja liialliselta lämmöltä.
- Älä koskaan aseta tuotetta lämmönlähteiden lähelle tai suoraan auringonvaloon.
- Älä puhdistu tuotetta juoksevan veden alla tai ultraäänikylvyssä.
- Älä käytä puhdistukseen pehmentäviä aineita sisältäviä pesuaineita, alkoholipitoisia liuotteita tai hankaavia puhdistusaineita.

Paristojen käytöstä johtuva vaara

- Tarkista paristot säännöllisesti. Vuotavat paristot voivat vaurioittaa tuotetta ja aiheuttaa ärsytystä ihokosketuksessa.
- Poista paristot paristokotelosta heti, kun ne ovat tyhjentyneet tai kun et aio käyttää tuotetta pitkään aikaan.
- Hävitä paristot asianmukaisesti. Paristoja ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana.

Tarkoituksenmukainen käyttö

Tämä tuote on tarkoitettu luku- ja työalueen suurentamiseen. Se on tarkoitettu käytettäväksi vain sisätiloissa ja kuivassa.

Älä koskaan käytä tuotetta muuhun kuin tässä ohjeessa kuvattuun tarkoitukseen. Kaikki muu käyttö on tarkoituksenvastaista ja voi aiheuttaa omaisuus- tai henkilövahinkoja. Älä tee muutoksia tuotteen rakenteeseen. Takuu ei korvaa tarkoituksenvastaisesta tai väärästä käytöstä syntyneitä vaurioita.

Tuotekuvaus

Valollinen suurennuslasi

- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| A Linssi | B [Päälle/pois]-painike |
| C Paristokotelo | D Jalka |
| E Adapteri | |

Käyttö

Paristojen asettaminen/vaihtaminen



- Käytä aina kolmea samanlaista, uutta paristoa.
- Varmista aina plusnapojen sijainti.

1. Sammuta valollisen suurennuslasin valaistus [päälle/pois]-painikkeella **B**.
2. Vedä paristokotelo **C** ylöspäin valollisesta suurennuslasista.
3. Ota käytetyt paristot pois paristokotelosta.
4. Aseta uudet paristot paristokoteloon.
⇒ Pariston miinusnapa osoittaa paristokotelon jousen suuntaan.
5. Aseta paristokotelo kiinnityslevyn yläreunaan ja työnnä paristokotelo alaspäin vasteeseen asti.

Valollisen suurennuslasin kytkeminen päälle ja pois

1. Kytke valaistus päälle painamalla [Päälle/pois]-painiketta **B**.
2. Kytke valaistus pois päältä painamalla [Päälle/pois]-painiketta uudestaan.

Ohje: valaistus sammuu automaattisesti 30 minuutin kuluttua.

Valollisen suurennuslasin käyttäminen

Jos tarvitset lukemiseen normaalisti silmälaseja, niitä ei tarvitse riisua suurennuslasin käytön ajaksi. Valollinen suurennuslasi on suunniteltu siten, että sitä voi käyttää yhdessä lukulasien kanssa.

1. Aseta valollinen suurennuslasi luettavan aineiston päälle siten, että linssi osoittaa itseesi päin.
2. Kytke valaistus päälle.
3. Muuta silmän ja valollisen suurennuslasin välistä etäisyyttä, kunnes luettava aineisto näkyy terävänä. Oikea etäisyys on yksilöllinen. Se riippuu käytetyistä lukulaseista ja silmän mukautumiskyvystä. Etäisyyden ohjearvo on 200 mm.
4. Sammuta valaistus käytön jälkeen.

Valon voimakkuuden säätäminen

✓ Valaistus on kytketty päälle.

1. Pidä *[Päälle/pois]*-painiketta **B** painettuna.
⇒ Noin kolmen sekunnin kuluttua valon voimakkuus vaihtuu arvojen 100 %, 75 % ja 50 % välillä.
2. Päästä *[Päälle/pois]*-painikkeesta irti, kun haluamasi valon voimakkuus on saavutettu.

Valolämpötilan säätäminen

Voit valita seuraavista valolämpötiloista:

- 6000 K: kylmä valkoinen
 - 4700 K: neutraali valkoinen
 - 2800 K: lämmin valkoinen
- ✓ Valaistus on kytketty pois päältä.

1. Pidä *[Päälle/pois]*-painiketta **B** painettuna.

⇒ Noin kolmen sekunnin kuluttua värilämpötila vaihtuu arvojen 6000 K, 4700 K ja 2800 K välillä.

2. Päästä *[Päälle/pois]*-painikkeesta irti, kun haluamasi värilämpötila on saavutettu.

Adapterin käyttäminen

Saadaksesi aikaan mukavamman vinon katsontakulman voit käyttää valollista suurennuslasia mukana tulevan adapterin kanssa.

Adapterin asentaminen

1. Aseta valollisen suurennuslasin tukijalan **D** kärki adapterille.
2. Paina valollista suurennuslasia takaa varovasti alaspäin.
⇒ Valollinen suurennuslasi loksahdaa kiinni adapteriin.

Adapterin poistaminen

1. Tartu toisella kädellä adapteriin ja toisella kädellä tukijalkaan.
2. Vedä adapteria takaa alaspäin irti tukijalasta.

Tekniset tiedot

Suurennus	
Tuotenro 156514	2,8 ×
Valonlähde	
Lamppu	LED (riskiryhmä 1 standardin EN 62471 mukaan)
Jännitteensyöttö	
Paristo	3 × Mignon (AA/LR6) / 1,5 V
Ympäristön olosuhteet	
Käyttölämpötilat	0 °C ... 40 °C

Puhdistaminen ja hoito

1. Varmista, että valollinen suurennuslasi on pois päältä.
2. Puhdista linssi pehmeällä, nukkaamattomalla liinalla, kuten mikrokuituliinalla.
3. Jos lika on tiukassa, kuten sormenjäljet, kostuta liina kevyesti. Älä käytä pehmentäviä aineita sisältäviä pesuaineita, alkoholipitoisia liuotteita tai hankaavia puhdistusaineita.
4. Kun valollista suurennuslasia ei käytetä, säilytä sitä peitettynä tai vedä mukana toimitettu mikrokuitupussi suurennuslasin linssin päälle.

Hävittäminen

Sähkölaitteiden hävittäminen



Tämä tuote noudattaa Euroopan parlamentin ja neuvoston sähkö- ja elektroniikkalaiteromun

direktiivin voimassa olevaa julistusta.

Tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana.

Hävitä tuote tai sen osat valtuutetun toimijan kautta tai paikallisella Sorttiasemalla. Huomioi voimassa olevat määräykset. Jos olet epävarma, ota yhteyttä kierrätyksestä vastaavaan viranomaiseen. Hävitä kaikki pakkausmateriaalit ympäristöystävällisellä tavalla.

Paristojen ja akkujen hävittäminen



Paristoja ja akkuja ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana.

Hävittääksesi paristot tai akun, poista ne laitteesta ja luovuta ne viralliselle keräilyasemalle.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Tuote on voimassa olevien EU-direktiivien ja kansallisten määräysten mukainen. Sille on myönnetty CE-merkintä. Voit lukea tämän tuotteen vaatimustenmukaisuusvakuutuksen tältä verkkosivulta: <http://www.eschenbach-vision.com/de-DE/konformitaetserklaerungen>.

Takuu

Eschenbach Optik GmbH takaa lain edellyttämällä tavalla tässä ohjeessa kuvatun tuotteen toiminnan valmistusvirheistä tai materiaalivirheistä johtuneissa vikatapauksissa. Epäasianmukaisesta käytöstä tai putoamisesta tai iskuista johtuvat vauriot eivät sisälly takuuseen. Takuu on voimassa vain silloin, kun omistajalla on näytettävissä ostokuitti.

Informacje o niniejszej instrukcji

Niniejsza instrukcja dotyczy następującego produktu:

Lupa podświetlana scribolux

Nr.
No.

Powiększenie 2,8 ×

156514

Przed rozpoczęciem korzystania z opisanego tu produktu należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję. Instrukcję należy przechowywać w staranny sposób. W przypadku przekazania produktu innej osobie, należy również przekazać jej niniejszą instrukcję.

W niniejszej instrukcji i/lub na produkcie zastosowano następujące znaki i symbole:

Symbol	Znaczenie
	Ogólne ostrzeżenie o miejscu zagrożenia
	Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami
	Producent: patrz odwrotna strona

Wskazówki bezpieczeństwa

 Produkt został skonstruowany zgodnie z najnowszym stanem techniki i jest zgodny z obowiązującymi europejskimi dyrektywami. Niemniej jednak istnieją zagrożenia resztkowe. Aby uniknąć zagrożeń, należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa. Należy zwrócić uwagę innym osobom na te zagrożenia.

Dzieci mogą zranić się podczas obchodzenia się z produktem. Nigdy nie należy pozwalać dzieciom na zabawę materiałem opakowaniowym i produktem bez nadzoru.

Produkt jest wyrobem medycznym klasy I (niesterylnym, bez funkcji pomiarowej) i jest zgodny z Rozporządzeniem (UE) 2017/745. Podczas stosowania produktu poza państwami członkowskimi UE należy przestrzegać odpowiednich wytycznych obowiązujących w danym kraju.

Niebezpieczeństwo podczas obchodzenia się z produktem

- Nigdy nie pozostawiać soczewek optycznych na słońcu bez osłony. Istnieje ryzyko pożaru wskutek efektu skupiania promieni słonecznych przez soczewki.
- Nigdy nie należy patrzeć przez produkty optyczne na słońce.

Nie patrzeć bezpośrednio w źródła światła produktu (grupa ryzyka 1 zgodnie z normą EN 62471).

Ryzyko szkód materialnych

- Produkt należy chronić przed wstrząsami, uderzeniami, wilgocią i nadmiernym ciepłem.
- Nigdy nie umieszczać produktu w pobliżu źródeł ciepła lub w bezpośrednim świetle słonecznym.
- Nie czyścić produktu pod bieżącą wodą ani w kąpeli ultradźwiękowej.
- Do czyszczenia nie używać roztworów mydła zawierających plastyfikatory, rozpuszczalników zawierających alkohol ani ściernych środków czyszczących.

Niebezpieczeństwo podczas obchodzenia się z bateriami

- Należy regularnie sprawdzać stan baterii. Nieszczelne baterie mogą spowodować uszkodzenie produktu i podrażnienia w przypadku kontaktu ze skórą.
- Baterie należy wyjąć z komory baterii natychmiast po ich wyczerpaniu lub w przypadku nieużywania produktu przez dłuższy czas.
- Należy zapewnić prawidłową utylizację baterii. Baterii nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi.

Użycie zgodne z przeznaczeniem

Produkt jest przeznaczony do powiększania obszaru czytania i pracy. Nadaje się wyłącznie do użytku wewnętrznego w suchych pomieszczeniach.

Produktu należy używać wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji. Każde inne użycie jest uważane za nie-

zgodne z przeznaczeniem i może prowadzić do powstania szkód materialnych lub szkód na osobach. Nie należy dokonywać żadnych zmian w konstrukcji produktu. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek niezgodnego z przeznaczeniem lub nieprawidłowego użycia.

Opis produktu

Lupa podświetlana

- | | |
|------------------|--------------------------|
| Ⓐ Soczewka | Ⓑ Przycisk
[Wł./Wył.] |
| Ⓒ Komora baterii | Ⓓ Podstawa |
| Ⓔ Adapter | |

Działanie

Wkładanie / wymiana baterii



- Należy zawsze używać 3 nowych baterii tego samego typu.
- Należy zwrócić uwagę na położenie odpowiedniego bieguna dodatniego.

1. Oświetlenie lupy podświetlanej należy wyłączać za pomocą przycisku [Wł./Wył.] Ⓑ.
 2. Zdjąć komorę baterii Ⓒ z lupy podświetlanej ku górze.
 3. Wyjąć zużyte baterie z komory baterii.
 4. Włożyć nowe baterie do komory baterii.
- ⇒ Biegun ujemny baterii powinien być skierowany w stronę sprężyny komory baterii.

5. Umieścić komorę baterii na górnej krawędzi płytki mocującej i przesunąć ją w dół aż do oporu.

Włączanie i wyłączanie lupy podświetlanej

1. Nacisnąć przycisk [Wł./Wył.] **B**, aby włączyć oświetlenie.
2. Ponownie nacisnąć przycisk [Wł./Wył.], aby wyłączyć oświetlenie.

Wskazówka: Oświetlenie wyłącza się automatycznie po 30 minutach.

Korzystanie z lupy podświetlanej

Jeśli użytkownik normalnie do czytania potrzebuje okularów, nie trzeba ich zdejmować. Lupa podświetlana została zaprojektowana tak, aby można jej było używać razem z okularami do czytania.

1. Ustawić lupę podświetlaną na materiale przeznaczonym do czytania tak, aby soczewka była skierowana w stronę czytającego.
2. Włączyć oświetlenie.
3. Zmieniać odległość od oka do podświetlanej lupy, aż materiał przeznaczony do czytania będzie wyraźnie widoczny. Prawidłowa odległość różni się w zależności od osoby. Zależy ona od używanych okularów do czytania i zdolności adaptacyjnych oczu. Orientacyjna wartość dla odległości wynosi 200 mm.
4. Po użyciu należy wyłączyć oświetlenie lupy podświetlanej.

Ustawianie natężenia światła

✓ Oświetlenie jest włączone.

1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk [Wł./Wył.] **B**.

⇒ Po ok. 3 sekundach natężenie światła będzie przełączane pomiędzy 100 %, 75 % i 50 %.

2. Zwolnić przycisk [Wł./Wył.] po osiągnięciu żadanego natężenia światła.

Ustawianie temperatury barwy

Można ustawić następujące temperatury barwy:

- 6000 K: zimne białe światło
- 4700 K: neutralne białe światło
- 2800 K: ciepłe białe światło

✓ Oświetlenie jest wyłączone.

1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk [Wł./Wył.] **B**.

⇒ Po ok. 3 sekundach temperatura barwy będzie przełączana pomiędzy 6000 K, 4700 K i 2800 K.

2. Zwolnić przycisk [Wł./Wył.] po osiągnięciu żądanej temperatury barwy.

Korzystanie z adaptera

Aby uzyskać wygodniejszy widok pod kątem, można użyć lupy podświetlanej z dołączonym adapterem.

Wkładanie adaptera

1. Umieścić lupę podświetlaną końcówkami podstawki **D** na adapterze.
2. Ostrożnie nacisnąć tylną część lupy podświetlanej w dół.

⇒ Lupa podświetlana zatrzaśnie się na adapterze.

Zdejmowanie adaptera

1. Przytrzymać adapter jedną ręką, a podstawkę drugą.
2. Pociągnąć tylną część adaptera w dół od podstawki.

Dane techniczne

Powiększenie	
Nr art. 156514	2,8 ×
Źródło światła	
Żarówka	LED (grupa ryzyka 1 zgodnie z normą EN 62471)
Napięcie zasilania	
Bateria	3 × Mignon (AA/LR6) / 1,5 V
Warunki otoczenia	
Temperatury robocze	0 °C ... 40 °C

Czyszczenie i pielęgnacja

1. Upewnić się, że lupa podświetlana jest wyłączona.
2. Oczyszczyć soczewkę miękką, niestrzępiącą się ściereczką np. z mikrofibry.
3. W przypadku silniejszych zabrudzeń, np. odcisków palców, należy lekko zwilżyć ściereczkę. Nie używać rozтворów mydła zawierających plastyfikatory, rozpuszczalników zawierających alkohol ani ściernych środków czyszczących.
4. Nieużywaną lupę podświetlaną należy przechowywać osłoniętą lub założyć dołączony woreczek z mikrofibry na soczewkę lupy.

Utylizacja

Utylizacja urządzeń elektrycznych



Ten produkt podlega europejskiej Dyrektywie w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego każdorazowo w aktualnie obowiązującej wersji. Produktu nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi.

Produkt lub jego części należy utylizować za pośrednictwem autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów lub gminnego zakładu utylizacji odpadów. Należy przestrzegać aktualnie obowiązujących przepisów. W razie wątpliwości należy skontaktować się z zakładem utylizacji odpadów. Wszystkie materiały opakowaniowe należy oddać do utylizacji w sposób przyjazny dla środowiska.

Utylizacja baterii i akumulatorów



Baterii i akumulatorów nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi.

W celu utylizacji należy wyjąć baterie lub akumulatory z urządzenia i oddać je w oficjalnym punkcie zbiórki.

Deklaracja zgodności

Produkt spełnia wszystkie wymagania obowiązujących dyrektyw UE i przepisów krajowych. Potwierdza to oznaczenie CE. Deklarację zgodności dla tego produktu można pobrać z następującej strony internetowej: <http://www.eschenbach-vision.com/de-DE/konformitaetserklaerungen>.

Rękojmia

Eschenbach Optik GmbH zapewnia działanie produktu opisanego w niniejszej instrukcji w ramach przepisów ustawowych w odniesieniu do występujących wad spowodowanych błędami w produkcji lub błędami materiałowymi.

Roszczenie z tytułu rękojmi nie obejmuje szkód spowodowanych niewłaściwą obsługą, ani uszkodzenia spowodowanego upuszczeniem lub uderzeniem. Z rękojmi można skorzystać wyłącznie po okazaniu dowodu zakupu.

O návodu k obsluze

Tento návod platí pro následující výrobek:

Lupa s osvětlením scribolux	Nr. No.
Zvětšení 2,8×	156514

Před použitím výrobku popsaného v tomto návodu k obsluze si pozorně přečtěte návod. Návod pečlivě uschovejte. Pokud výrobek předáte dál, předejte s ním i tento návod.

V tomto návodu a/nebo na výrobku jsou použity následující značky a symboly:

Symbol	Význam
	Obecné varování před nebezpečím
	Výrobek zlikvidujte podle místních předpisů
	Výrobce: viz zadní strana

Bezpečnostní pokyny

 Výrobek je navržen podle nejnovějšího stavu techniky a odpovídá platným evropským směrnicím. Přesto existují zbytková rizika. Je nutné dodržovat bezpečnostní pokyny, abyste předešli nebezpečí. Upozorněte na tato nebezpečí i ostatní osoby.

Při manipulaci s výrobkem může dojít k úrazu dětí. Nenechávejte děti nikdy bez dozoru hrát si s obalovým materiálem a výrobkem.

Výrobek je zdravotnickým prostředkem třídy I (nesterilní, bez měřicí funkce) a splňuje nařízení (EU) 2017/745. Pokud

je používán mimo členské státy EU, je třeba dodržovat pokyny v příslušné zemi.

Nebezpečí při manipulaci s výrobkem

- Nikdy nenechávejte nezakryté čočky na slunci. Hrozí nebezpečí požáru vyvolaného účinkem soustředných čoček.
- Nikdy se nedívejte optickými výrobky do slunce.
Nedívejte se přímo do světelných zdrojů výrobku (riziková skupina 1 podle normy EN 62471).

Nebezpečí vzniku věcných škod

- Výrobek chraňte před nárazy nebo otřesy, vlhkostí a nadměrným teplem.
- Výrobek nikdy neumísťujte do blízkosti tepelných zdrojů nebo na přímé sluneční světlo.
- Výrobek nečistěte pod tekoucí vodou ani v ultrazvukové lázni.
- K čištění nepoužívejte mýdlový roztok obsahující změkčovadla, rozpouštědla s obsahem alkoholu ani abrazivní čisticí prostředky.

Nebezpečí při manipulaci s bateriemi

- Pravidelně kontrolujte baterie. Vytékající baterie mohou poškodit výrobek a způsobit podráždění při kontaktu s pokožkou.
- Pokud jsou baterie vybité anebo výrobek delší dobu nepoužíváte, vyjměte je z přihrádky na baterie.
- Zajistěte řádnou likvidaci baterií. Baterie se nesmějí likvidovat společně s domovním odpadem.

Použití v souladu s určením

Výrobek je určen ke zvětšení čtecího a pracovního prostoru. Je vhodný jen pro vnitřní použití v suchých místnostech.

Výrobek používejte pouze způsobem popsáním v tomto návodu. Jakékoli jiné použití je považováno za nesprávné a může vést k věcným škodám nebo zranění osob. Neprovádějte žádné změny v konstrukci výrobku. Za škody způsobené nevhodným nebo nesprávným použitím nepřebírá výrobce odpovědnost.

Popis výrobku

Lupa s osvětlením

- | | |
|----------------------------------|--|
| A Čočka | B Tlačítko
[Zapnout/vypnout] |
| C Přihrádka na
baterie | D Stojan |
| E Adaptér | |

Provoz

Vložení / výměna baterií



- Vždy používejte tři stejné nové baterie.
- Dodržujte orientaci kladného pólu.

1. Osvětlení lupy vypněte tlačítkem [Zapnout/vypnout] **B**.
2. Vysuňte kryt přihrádky na baterie **C** nahoru směrem od lupy s osvětlením.
3. Vyjměte vybité baterie z přihrádky na baterie.
4. Vložte do přihrádky na baterie nové baterie.
⇒ Záporný pól baterie musí být obrácen k pružině v přihrádce na baterie.
5. Nasadte přihrádku na baterie na horní hranu upevňovací desky a posuňte ji dolů až k zarážce.

Zapnutí a vypnutí lupy s osvětlením

1. Stisknutím tlačítka [Zapnout/vypnout] **B** osvětlení zapnete.
2. Opětovným stisknutím tlačítka [Zapnout/vypnout] osvětlení vypnete.

Upozornění: Po 30 minutách se osvětlení automaticky vypne.

Použití lupy s osvětlením

Pokud ke čtení běžně potřebujete brýle, nemusíte si je sundávat. Lupa s osvětlením je navržena tak, aby ji bylo možné při čtení používat společně s brýlemi.

1. Nastavte lupu s osvětlením na tisk tak, aby čočka byla obrácena k vám.
2. Zapněte osvětlení.
3. Měňte vzdálenost oka od lupy s osvětlením, dokud nebudete vidět písmena ostře. Správná vzdálenost je individuální. Závisí na používaných brýlích na čtení a akomodační schopnosti očí. Orientační vzdálenost činí 200 mm.
4. Po použití vypněte osvětlení.

Nastavení intenzity světla

✓ Osvětlení je zapnuté.

1. Přidržte tlačítko *[Zapnout/vypnout]* **B** ve stisknutém stavu.
⇒ Po cca 3 sekundách se intenzita světla postupně změní v krocích 100 %, 75 % a 50 %.
2. Při dosažení požadované intenzity světla tlačítko *[Zapnout/vypnout]* opět uvolněte.

Nastavení teploty barev

Můžete nastavit následující teploty barev:

- 6000 K: studené bílé světlo
- 4700 K: neutrální bílé světlo
- 2800 K: teplé bílé světlo

✓ Osvětlení je vypnuté.

1. Přidržte tlačítko *[Zapnout/vypnout]* **B** ve stisknutém stavu.
⇒ Po cca 3 sekundách se teplota barev postupně změní v krocích 6000 %, 4700 % a 2800 %.
2. Po dosažení požadované teploty barev tlačítko *[Zapnout/vypnout]* opět uvolněte.

Použití adaptéru

Pro pohodlnější pohled v šikmém směru můžete použít lupu s osvětlením spolu s dodaným adaptérem.

Nasazení akumulátoru

1. Nasadte špičky stojánku **D** lupy s osvětlením na adaptér.
2. Stlačte lupu s osvětlením v zadní části dolů.
⇒ Lupa s osvětlením zaskočí do adaptéru.

Sejmutí adaptéru

1. Uchopte adaptér jednou rukou a stojánek druhou rukou.
2. Stáhněte adaptér vzadu ze stojánku směrem dolů.

Technické údaje

Zvětšení	
Č. výr. 156514	2,8 ×
Zdroj světla	
Světelný zdroj	LED (riziková skupina 1 podle EN 62471)
Napájení	
Baterie	3 × typ mignon (AA/LR6) / 1,5 V
Okolní podmínky	
Provozní teplota	0 °C ... 40 °C

Čištění a údržba

1. Ujistěte se, že je lupa s osvětlením vypnutá.
2. Čočku očistěte měkkým hadříkem, který neuvolňuje vlákna, např. hadříkem z mikrovlákna.
3. Při silnějším znečištění, např. otisky prstů, hadřík mírně navlhčete. Nepoužívejte mýdlový roztok obsahující změkčovadla, rozpouštědla s obsahem alkoholu ani abrazivní čisticí prostředky.
4. Pokud lupu s osvětlením nepoužíváte, zakryjte ji nebo navlékněte na čočku lupy dodaný sáček z mikrovlákna.

Likvidace

Likvidace elektrických spotřebičů



Na tento výrobek se vztahuje evropská směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních v aktuálně platném znění. Výrobek se nesmí likvidovat společně s běžným domovním odpadem.

Výrobek nebo jeho části zlikvidujte prostřednictvím autorizované firmy pro likvidaci odpadů nebo sběru komunálního odpadu. Dodržujte platné předpisy. V případě pochybností se obraťte na podnik zajišťující likvidaci odpadu. Všechny obalové materiály zlikvidujte způsobem šetrným k životnímu prostředí.

Likvidace baterií a akumulátorů



Baterie a akumulátory se nesmějí likvidovat společně s domovním odpadem.

Při likvidaci vyjměte baterie nebo akumulátory ze zařízení a odevzdejte je na sběrném místě.

Prohlášení o shodě

Výrobek splňuje veškeré požadavky platných směrnic EU a národních předpisů. Tuto shodu potvrzuje označení CE. Prohlášení o shodě pro tento výrobek si můžete stáhnout z následující webové stránky: <http://www.eschenbach-vision.com/de-DE/konformitaetserklaerungen>.

Záruka

Eschenbach Optik GmbH ručí za funkčnost výrobku popsaného v tomto návodu v rámci zákonných ustanovení s ohledem na případné závady, které vzniknou v důsledku výrobních vad nebo vad materiálu. Záruka se nevztahuje na poškození způsobená nesprávným zacházením, včetně poškození zapříčiněných pádem nebo nárazem. Záruku lze uplatnit pouze po předložení dokladu o koupi.

日本語

本取扱説明書について

この指示は次の製品に適用されます。

照明付きルーペ scribolux

Nr.
No.

拡大率2.8×

156514

ここに記載されている製品をお使いになる前に、本取扱説明書をよくお読みください。本取扱説明書を大切に保管してください。製品を人に渡す時には、本取扱説明書と一緒に渡してください。

次の記号とマークは、本取扱説明書の中でおよび/または製品に使われています。

マーク	意味
	危険な場所に対する全般的な警告
	地元の指針に従った製品のごみ処理
	メーカー：裏面参照

安全上の注意

 製品は最新の技術に従って設計されており、現行の欧州指針を満たしています。それにもかかわらず残余危険があります。危険を避けるために、安全上の注意を守ってください。他の人にもこのような危険に注意するように促してください。

製品を取り扱う際にお子様が怪我をする可能性があります。お子様が梱包材や製品と遊ぶ時には必ず監視してください。

本製品はクラスI医療機器（非滅菌、測定機能なし）であり、規則（EU）2017/745に準拠しています。EU加盟国以外で本製品を使用する場合は、それぞれの国固有のガイドラインに従う必要があります。

製品を取り扱う際の危険

- カバーをかけずに光学レンズを太陽の下に放置しないでください。レンズの焼き付き効果により、火災が発生する可能性があります。
- 光学製品を使用して太陽を絶対に見ないでください。

製品の光源を直接見ないでください（EN 62471 によるリスクグループ 1）。

JA

物的損傷の危険

- 製品を衝撃、打撃、湿気、過度な熱から保護してください。
- 製品を決して熱源に近くに置くかあるいは直射日光にさらさないでください。
- 製品を流水や超音波洗浄機で洗浄しないでください。
- プラスチック用可塑剤、アルコール系溶剤、研磨性洗浄剤を含む石鹼水溶液は、洗浄には使用しないでください。

電池を取り扱う際の危険

- 定期的に電池の点検を行ってください。液漏れした電池は、製品に損傷を与え、皮膚に触れた場合は炎症を引き起こす可能性があります。
- 電池が切れた場合や、長期間使用しない場合は、電池を電池収納部から取り出してください。
- 電池は適切に処分してください。電池は家庭ごみとして処分してはなりません。

適正な使い方

製品の用途は、読書や作業スペースを広げることに定められています。製品は、もっぱら乾燥した屋内での使用に適しています。

製品は、本取扱説明書にある通りに使用してください。その他の用途は全て不適切な使用であり、物的損害や人的損傷の原因となることがあります。製品の構造に改造を加えないでください。不適切なまたは誤った使用が原因で発生した損傷に対しては責任を負いかねます。

製品の説明

照明付きルーペ

● A レンズ	● B ボタン [オン/オフ]
● C 電池収納部	● D スタンド
● E アダプター	

運転

電池を入れる/交換する



- 新しい電池は、常に同じ種類のものを3本使用してください。
- それぞれのプラス端子の位置を確認してください。

1. 照明付きルーペの照明は、ボタン [オン/オフ] **B** で消灯してください。
 2. 電池収納部 **C** を上に引き上げて、照明付きルーペから取り外します。
 3. 使用済みの電池を電池収納部から取り外します。
 4. 新しい電池を電池収納部に挿入します。
- ⇒ 電池のマイナス端子は、電池収納部のバネ側を向いています。
5. 電池収納部の上端を取付板に合わせ、電池収納部を止まるまで下にスライドさせます。

照明付きルーペのオン/オフを切り替える

1. 照明をオンにするには、ボタン [オン/オフ] **S** を押します。
2. 照明をオフにするには、ボタン [オン/オフ] をもう一度押します。

ご注意：30分後に照明は自動的に消灯します。

照明付きルーペを使用する

通常、読書をする際に眼鏡が必要な場合は、外す必要はありません。照明付きルーペは、老眼鏡と併用できるよう設計されています。

1. 照明付きルーペを読みたいものの上に置き、レンズが自分の方を向くようにします。
2. 照明を点灯します。
3. 読みたいものをはっきりと見ることができるようまで、目から照明付きルーペまでの距離を調整します。正しい距離は人によって異なります。それは、使用する老眼鏡と目の順応性によって異なります。推奨距離は200 mmです。
4. 使用後は照明を消してください。

光の強さの調整

✓ 照明が点灯しています。

1. ボタン [オン/オフ] **B** を押したままにします。
- ⇒ 約3秒後、光の強さが100 %、75 %、50 %の間で切り替わります。
2. 希望の明るさになったら、ボタン [オン/オフ] を離します。

色温度の調節

次の色温度を調節できます。

- 6000 K：冷たい白色
- 4700 K：ニュートラルな白色
- 2800 K：温かい白色

✓ 照明が消灯しています。

1. ボタン [オン/オフ] **B** を押したままにします。

⇒ 約3秒後に、色温度が6000 K、4700 K、2800 Kの間で切り替わります。

2. 希望の色温度になったら、ボタン [オン/オフ] を離します。

アダプターを使用する

より快適な角度で見するには、付属のアダプターを使用して照明付きループを使用できます。

アダプターを挿入する

1. スタンド **D** の先端部分を使用して、照明付きループをアダプターに取り付けます。
2. 照明付きループの背面を軽く押します。

⇒ 照明付きループは、アダプタにカチッと嵌まり込みます。

アダプターを取り外す

1. アダプターを片手で持ち、スタンドをもう片方の手で持ちます。

2. アダプターを後ろに引き下げ、スタンドから外します。

技術データ

拡大	
商品番号 156514	2.8×
光源	
照明器具	LED (EN 62471 によるリスクグループ 1)
電圧供給	
電池	3本の単3形乾電池 (AA/LR6) /1.5 V
環境条件	
使用温度	0 °C ... 40 °C

洗浄とお手入れ

1. 照明付きループのスイッチがオフであることを確認してください。
2. マイクロファイバークロスなどの柔らかい糸くずの出ない布でレンズを拭いてください。
3. 指紋などの頑固な汚れには、布を少し湿らせてください。柔軟剤を含むせっけん液、アルコールを含む溶剤、研磨性の洗剤はご使用にならないでください。
4. 使用しないときは、照明付きループをカバーで覆っておくか、同梱のマイクロファイバー製バッグをループのレンズにかぶせてください。

ごみ処理

電気製品のごみ処理



この製品は、欧州の電気電子機器廃棄物指令の最新の有効な版に従っています。製品は、通常の家庭ごみとして処分してはなりません。

製品またはその部品は、許可を受けた廃棄物処理業者または地元の自治体のごみ処理施設で処分してください。最新の規則を遵守してください。疑問点がある場合にはごみ処理施設にお問い合わせください。梱包材は全て環境にやさしい処理に引き渡してください。

バッテリーや電池のごみ処理



バッテリーや電池は、家庭ごみとして処分してはなりません。

処分するのにバッテリーや電池を装置から取り出して、指定の収集場所に出してください。

適合宣言

製品は、現行の欧州指令と国内規則の全ての要件を満たしています。これはCEマークによって確認しています。この製品に対する適合宣言は、次の適合宣言で確認できます：<http://www.eschenbach-vision.com/de-DE/konformitaetserklaerungen>。

保証

Eschenbach Optik GmbH は、法的な規則の範囲内で本取扱説明書に記載されている製品の機能を、製造の誤りや原材料の誤りに原因を求めることができる欠陥に関連して保証します。不適切な取り扱いによる損害、落下や衝突による損傷も保証の対象外となります。保証は、領収書を提出する場合に限り請求できます。

DE: Die Anleitung ist als PDF in Ihrer Sprache online abrufbar:
EN: The instructions are available online as a PDF in your language:
FR: Les instructions sont disponibles en ligne au format PDF dans votre langue:
IT: Le istruzioni sono disponibili online in formato PDF nella vostra lingua:
ES: Las instrucciones están disponibles en línea en formato PDF en su idioma:
NL: De instructies zijn online beschikbaar als PDF in jouw taal:
DA: Instruktionerne er tilgængelige online som en PDF på dit sprog:
SV: Instruktionerna finns tillgängliga online som en PDF-fil på ditt språk:
NO: Instruksjonene er tilgjengelige på nettet som PDF på ditt språk:
FI: Ohjeet ovat saatavilla verkossa PDF-tiedostona omalla kielelläsi:
PL: Instrukcje są dostępne online w formacie PDF w języku użytkownika:
CS: Pokyny jsou k dispozici online ve formátu PDF ve vašem jazyce:
JA: 説明書は、あなたの言語でPDFとしてオンラインで入手できます。:

<https://www.eschenbach-vision.com/de-DE/produkte/service>



 **ESCHENBACH**

Eschenbach Optik GmbH



Fuerther Strasse 252

90429 Nuremberg

For the authorized representative in your country please refer to:

www.eschenbach-optik.com

info@eschenbach-optik.com