


Mise à jour du logiciel optaro® XL

Instructions

1. Sur votre iPad, téléchargez le fichier de mise à jour depuis la page d'accueil Eschenbach, dans l'onglet **Produits - Service**

eschenbach-vision.com/fr-FR/produits/produit/optaror-xl-11-ipad-holder165341

2. Le fichier **.BRN** téléchargé sera ensuite accessible depuis le dossier **Téléchargements** de votre iPad.

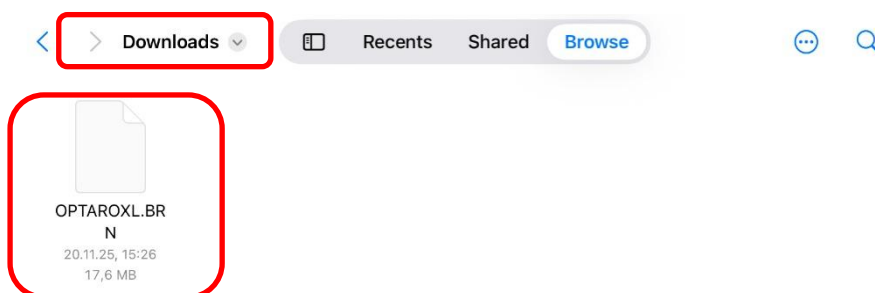


3. Allumez optaro® XL. Lorsque le **voyant d'état bleu est allumé en continu**, appuyez sur le bouton de mise à jour situé à l'arrière de l'appareil (voir repère rouge) et maintenez-le enfoncé pendant **environ 5 secondes** jusqu'à ce que le **voyant de connexion**, situé sur le port USB-C et à côté du bouton de mise à jour, **passe à l'orange**.



Tant que le voyant **LED est orange** (ou clignote), optaro® XL est en mode mise à jour et ne peut pas être utilisé. Si optaro® XL est éteint pendant la mise à jour du logiciel ou si le bouton de réinitialisation est enfoncé, la mise à jour sera interrompue et l'ancien logiciel restera en service.

4. Connectez optaro® XL à votre iPad avec le câble de charge USB-C.




5. Ouvrez le dossier **Fichiers**  sur votre iPad, puis le dossier Téléchargements. C'est là que se trouve le fichier .BRN

L'emplacement de stockage « **NO NAME** » s'affiche dans la barre latérale de l'iPad. Déplacer ou copier le fichier .BRN dans le dossier « **NO NAME** ».

Vous pouvez procéder de deux manières :

- a. Faites glisser le fichier du dossier Téléchargements vers le dossier « NO NAME ».
- b. Appuyez longuement sur le fichier .BRN jusqu'à ce que le menu contextuel apparaisse, puis sélectionnez « Déplacer » dans le menu en haut et appuyez sur le dossier « NO NAME ». Le fichier sera alors déplacé vers le dossier désigné.

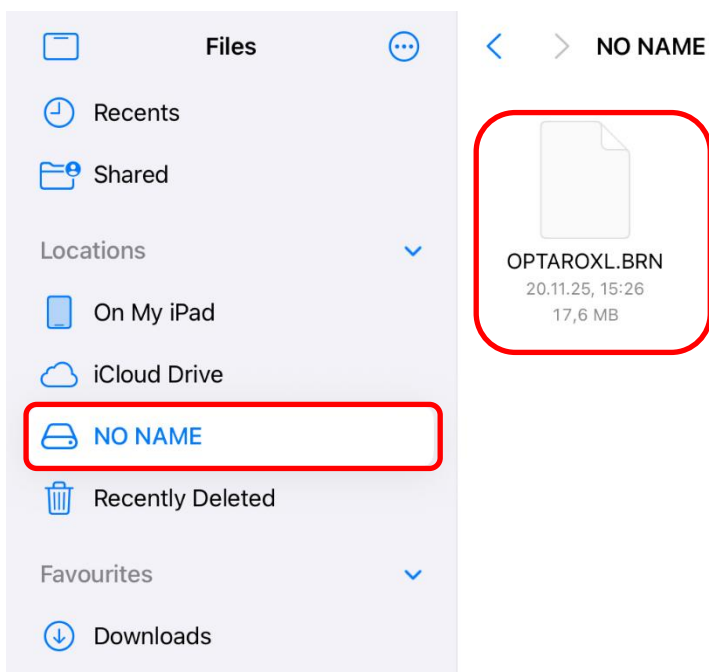

Important:

Utilisez uniquement le fichier de mise à jour nommé **OPTAROXL.BRN**. Si le fichier a été accidentellement renommé, dupliqué ou téléchargé plusieurs fois, ce qui a entraîné une modification du nom du fichier, l'appareil ne reconnaîtra pas la mise à jour.

- Débranchez ensuite le câble USB-C de l'iPad.
La LED clignotera en orange pendant un moment, qui peut prendre jusqu'à 3 minutes. Il est toutefois possible que la LED s'éteigne après quelques secondes, puis se remette à clignoter. Dans ce cas, veuillez patienter un peu plus longtemps afin de vous assurer que la mise à jour s'effectue correctement.

La LED s'éteindra complètement après un certain temps. Le nouveau logiciel aura alors été installé avec succès sur l'optaro® XL.

- Ouvrez les paramètres de l'application optaro® XL pour vérifier si la mise à jour a été installée avec succès. La version actuelle du logiciel est affichée dans la section « À propos ».

